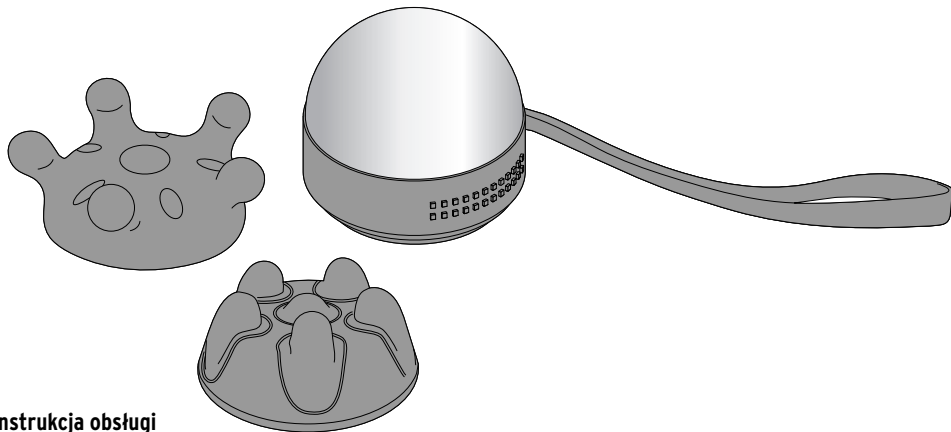




Mini-masażer 3-w-1



pl Instrukcja obsługi

Spis treści

Drodzy Klienci!

Państwa nowy mini-masażer z trzema wymiennymi nasadkami zapewnia przyjemny relaks. Urządzenie jest małe i poręczne, dzięki czemu można je zabrać ze sobą i wykonywać masaże w wolnej chwili.

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu.

Zespół Tchibo



www.tchibo.pl/instrukcje

- 3 Wskazówki bezpieczeństwa
- 6 Widok całego zestawu (zakres dostawy)
- 7 Wkładanie baterii
- 7 Zdejmowanie/zakładanie nasadek do masażu
- 8 Obsługa
- 9 Czyszczenie i dezynfekcja
- 9 Problemy i sposoby ich rozwiązywania
- 9 Dane techniczne
- 10 Usuwanie odpadów

Wskazówki bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produktu zgodnie z niniejszą instrukcją, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Mini-masażer przeznaczony jest do automasażu, zapewniającego poprawę samopoczucia.

Urządzenie zaprojektowano do użytku w prywatnych gospodarstwach domowych.

Nie nadaje się ono do stosowania w klinikach, gabinetach masażyстів, salonach wellness itp. Mini-masażer nie jest wyrobem medycznym i nie służy do leczenia bólu. W razie wątpliwości lub niepewności prosimy przed użyciem skonsultować się z lekarzem.

- Urządzenie można stosować wyłącznie:
 - ... do użytku zewnętrznego na ciele.
 - ... zgodnie z przeznaczeniem, w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Każde użycie niezgodne z przeznaczeniem może być niebezpieczne!

NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie dla dzieci

- Urządzenia nie mogą używać dzieci ani osoby, które ze względu na zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe lub brak doświadczenia bądź nieznajomość podstaw obsługi nie są w stanie bezpiecznie go obsługiwać. Należy zapewnić dzieciom odpowiedni nadzór, aby wykluczyć możliwość zabawy urządzeniem.
- Połączenie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Połączona bateria może w ciągu zaledwie dwóch godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

W przypadku podejrzenia, że bateria została połączona lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.

- Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Produkt nie jest zabawką. Dzieci nie mogą mieć do niego dostępu.

Aby nie narażać zdrowia, zdecydowanie odradza się stosowanie urządzenia w następujących przypadkach:

Nie używać urządzenia do masażu ...

- ... w okresie ciąży,
- ... w przypadku wystąpienia zmian chorobowych lub urazów w obszarach masażu (np. stłuczenia, zapalenia, otwarte rany, wypadnięcie dysku itp.),
- ... po zażyciu substancji, które powodują obniżenie zdolności postrzegania (np. środków przeciwbólowych, alkoholu),
- ... do masowania oczu, okolic oczu, krtani, kości lub stawów, miejsc intymnych, nerek lub innych szczególnie wrażliwych części ciała,

- ... u zwierząt,
- ... podczas leżenia w łóżku,
- ... w przypadku widocznych uszkodzeń urządzenia.

Przed zastosowaniem urządzenia zasięgnąć porady lekarza, zwłaszcza w przypadku ...

- ... przechodzenia ciężkiej choroby lub po operacji chirurgicznej,
- ... posiadania rozrusznika serca, implantów lub innych aparatów wspomagających,
- ... zakrzepowego zapalenia żył,
- ... cukrzycy,
- ... stanów bólowych niewiadomego pochodzenia.
- Czas masażu nie powinien przekraczać 20 minut. Dłuższy masaż może prowadzić do nadmiernej stymulacji mięśni. W pojedynczych przypadkach może wówczas dojść do napięcia mięśni zamiast do ich rozluźnienia.
- Jeżeli podczas użycia urządzenia pojawią się bóle lub wysypka skórna, należy natychmiast zakończyć masaż i nie używać więcej urządzenia.

Należy przestrzegać następujących zasad bezpiecznego użytkowania:

- W przypadku nieprawidłowego działania lub uszkodzenia urządzenia należy zlecić jego naprawę zakładowi specjalistycznemu.
- Nigdy nie trzymać urządzenia na dłuższy czas w jednym miejscu. Prowadzić je po ciele ruchem okrężnym.
- Nigdy nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.

OSTRZEŻENIE przed pożarem/wybuchem

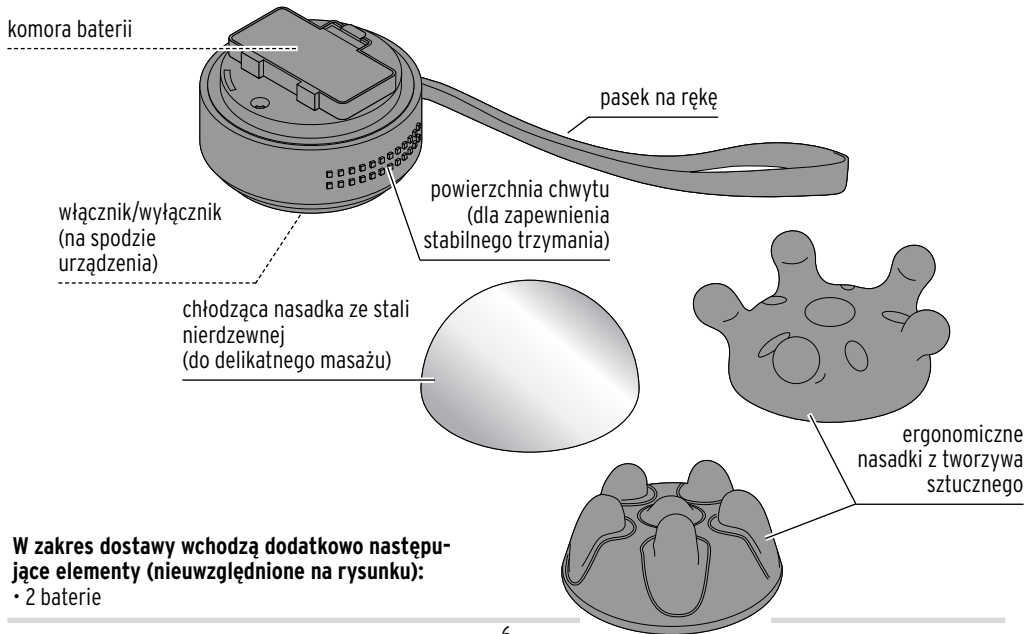
- Baterii nie wolno ładować, rozbierać, wrzucać do ognia ani zwierać.
- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i śluzówkami. W razie potrzeby opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.

UWAGA - niebezpieczeństwo lekkich obrażeń ciała i szkód materialnych


- Chronić urządzenie przed działaniem wilgoci. Nie wolno go zanurzać w wodzie ani innych cieczach.

- Baterie oraz produkt należy chronić przed nadmiernym ciepłem. Należy zachować wystarczający odstęp od źródeł ciepła, takich jak np. piec czy płyta kuchenna.
- Wyjąć baterie z urządzenia, gdy są one wyczerpane lub gdy urządzenie nie będzie przez dłuższy czas używane. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- Należy zawsze wymieniać wszystkie baterie. Nie stosować jednocześnie starych i nowych baterii, baterii różnych typów, marek lub o różnej pojemności.
- Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
- Jeżeli urządzenie wpadło do wody, nie może być dalej używane.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.


Widok całego zestawu (zakres dostawy)



Wkładanie baterii

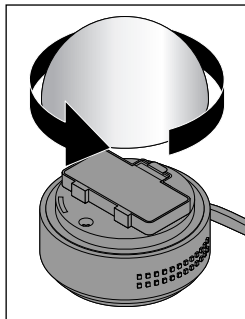

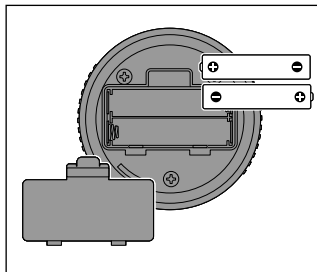1. Obrócić założoną nasadkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.




2. Nacisnąć zatrzask na pokrywie komory baterii w dół, a następnie zdjąć pokrywę do góry.

3. Włożyć baterie do komory baterii, jak pokazano na rysunku. Pamiętać przy tym o właściwym ułożeniu biegunów (+/-).
4. Założyć pokrywkę komory baterii. Musi się ona słyszalnie i wyczuwalnie zatrzaskać.


Zdejmowanie/zakładanie nasadek do masażu

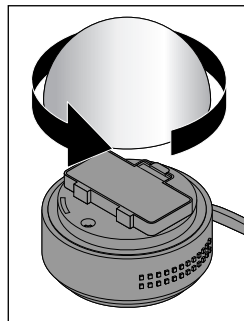Zdejmowanie nasadki do masażu




- ▷ Obrócić założoną nasadkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

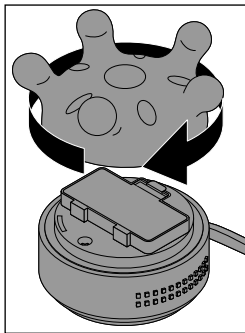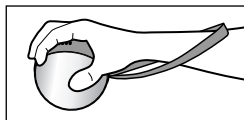Zakładanie nasadki do masażu




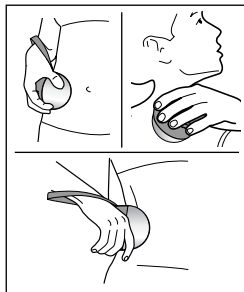
- ▷ Obrócić wybraną nasadkę do oporu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Obsługa




1. Przełożyć rękę przez pasek i chwycić masażer, jak pokazano na rysunku.

2. Nacisnąć włącznik/wyłącznik  na spodzie urządzenia, aby włączyć masażer.



3. Przyłożyć masażer do części ciała, która ma być masowana. Intensywność masażu można zmieniać przez lżejsze bądź mocniejsze dociskanie urządzenia do skóry.

4. Aby wyłączyć masażer, ponownie nacisnąć włącznik/wyłącznik  na spodzie urządzenia.

Czyszczenie i dezynfekcja

UWAGA - ryzyko szkód materialnych
Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach.

- ▷ W razie potrzeby przetrzeć urządzenie lekko zwilżoną w wodzie ściereczką.
- ▷ W celach dezynfekcyjnych przetrzeć nasadki do masażu ściereczką zwilżoną w alkoholu etylowym. Alkohol etylowy można nabyć w aptekach.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Urządzenia nie można włączyć.	<ul style="list-style-type: none">• Czy bateria nie jest zużyta?• Czy bateria jest prawidłowo włożona? Zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).• Czy pokrywka komory baterii jest prawidłowo założona?
-------------------------------	--

Dane techniczne

Model:	381 449
Bateria:	2 x LR03 (AAA) / 1,5V
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



Usuwanie odpadów

Urządzenie, jego opakowanie oraz dostarczone baterie zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.



Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych!

Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby przekazywać zużyte baterie lub akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki, względnie usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

Numer artykułu:

381 449
