


Masażer twarzy

pl Instrukcja obsługi

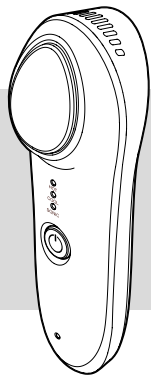

www.tchibo.pl/instrukcje

Drodzy Klienci!

Państwa nowy masażer twarzy jest wyposażony zarówno w funkcję ciepła jak i chłodu. Funkcję vibracji dźwiękowych można włączyć w dowolnym momencie. Oddziaływanie ciepłem (temperatura 42°C) na skórę twarzy może pobudzić krążenie krwi i dzięki temu poprawić wchłanianie produktów pielęgnacyjnych. Oddziaływanie zimnem (temperatura 6°C) może natomiast zmniejszyć pory w skórze twarzy, ujędrnić ją oraz wygładzić zmarszczki. Dzięki funkcji vibracji dźwiękowych można dodatkowo wzmocnić wyżej wymienione efekty. Skóra stanie się bardziej gładka, jędrna i elastyczna. Życzymy wiele radości i satysfakcji z użytkowania niniejszego masażera twarzy!

Zespół Tchibo

Wskazówki bezpieczeństwa

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt zgodnie z niniejszą instrukcją, aby uniknąć przypadkowych urazów ciała lub szkód. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również niniejszą instrukcję.

Przeznaczenie

Urządzenie przeznaczone jest do oddziaływania ciepłem i zimnem oraz do masażu skóry twarzy. Produkt zaprojektowano wyłącznie do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych (np. w salonach kosmetycznych itp. placówkach).

Produktu można używać tylko w suchych pomieszczeniach.

Nie należy używać urządzenia ...

... w przypadku otwartych ran, oparzeń lub podrażnień skóry oraz innych schorzeń skóry,

... w przypadku zaburzeń krążenia, cukrzycy, gruźlicy, guzów nowotworowych, stłuczeń, nerwobólów (neuralgii) nerwu trójdzielnego,

... po operacji,

... w okresie ciąży,

... w przypadku wszczepionego rozrusznika serca,

... w przypadku występowania bólu niewiadomego pochodzenia. W razie wątpliwości należy przed użyciem skonsultować się z lekarzem.

• Nie używać urządzenia bezpośrednio w okolicach oczu. Należy omijać ten obszar.

• Produkt nie może być używany przez osoby mające problemy z właściwym odczuwaniem ciepła lub zimna. Określone choroby,

np. cukrzyca, mogą powodować zaburzenia w odczuwaniu temperatury. Osoby niepełnosprawne lub niedoświadczone nie zawsze potrafią zasygnalizować dyskomfort związany z nadmiernym działaniem ciepła lub zimna. Dlatego produktu nie należy stosować u osób niesamodzielnych, chorych, względnie niewrażliwych na ciepło lub zimno.

• Do oparzeń skóry może dochodzić już przy temperaturze 42°C! Dlatego masażer twarzy z włączoną funkcją ciepła nie może być używany zbyt długo w jednym miejscu.

Niebezpieczeństwo dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością do obsługi urządzeń

• Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

Dzieci poniżej 8. roku życia nie mogą mieć do niego dostępu.

• Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

• Urządzenia nie wolno stosować u małych dzieci, ponieważ mają one bardzo wrażliwą skórę. Urządzenie może być używane przez dzieci od lat 8, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz nieposiadające doświadczenia i/lub odpowiedniej wiedzy, o ile osoby te znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumią ewentualne zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania. Dzieci nie mogą przeprowadzać prac związanych z czyszczeniem ani konserwacją urządzenia, chyba że znajdują się pod nadzorem.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

• Urządzenie może być ładowane wyłącznie w suchych pomieszczeniach. Do ładowania należy używać wyłącznie odpowiednich zasilaczy sieciowych USB, których parametry są zgodne z „Danymi technicznymi”.

• Nie ładować produktu w pobliżu wody. Urządzenie nie może mieć kontaktu z wodą ani innymi cieczami, gdy jest podłączone do sieci elektrycznej. Podczas ładowania nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie lub innych cieczach, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym.



Ostrzeżenie - Nie wolno używać urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, nad umywalką lub innym pojemnikiem wypełnionym wodą.

• Jeżeli podczas ładowania urządzenie wpadnie do wody, nie wolno po nie sięgać! Natychmiast wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazda elektrycznego, względnie wtyczkę USB z gniazda przyłączeniowego. Przed ponownym podłączeniem pozostawić urządzenie, kabel przyłączeniowy i ewentualnie zasilacz sieciowy do wyschnięcia.



• W celu naładowania urządzenia należy podłączyć je tylko do przepięsowo zainstalowanego gniazda elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi zasilacza sieciowego.

Widok całego zestawu

(zakres dostawy)



Zdjąć folię ochronną z powierzchni masującej.

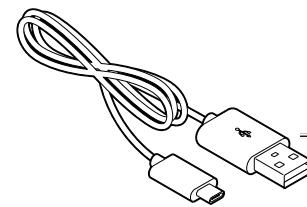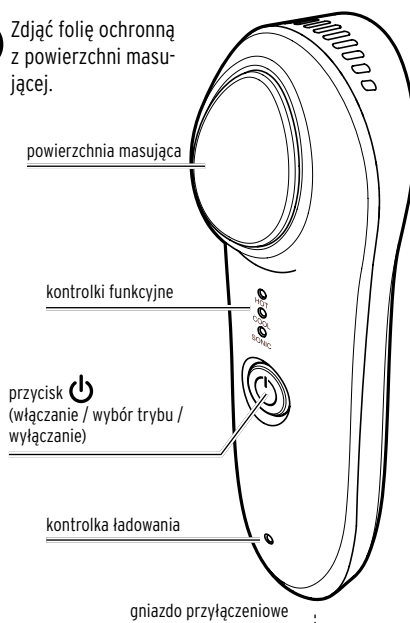

kabel USB do ładowania

Dodatkowo w zakresie dostawy (brak ilustracji):
woreczek do przechowywania

Dodatkowe informacje dot. włożonego akumulatora:

Producent: Shenzhen LIMENG TONG Electronic Technology Co., Ltd., 4th Floor, Building 1, Huahan Science Park, No. 19 Qiyun West Road, Pingshan District, Shenzhen, China

Marka: LMT

Strona

internetowa: <http://lmtzdkj.1688.com>

E-mail: 335687086@qq.com

Niebezpieczeństwo pożaru/wybuchu

• Unikać składowania, ładowania czy używania produktu w skrajnych temperaturach i przy bardzo niskim ciśnieniu powietrza (np. na dużych wysokościach).

• Urządzenie należy chronić przed wstrząsami, upadkiem, kurzem/pyłem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz ekstremalnymi temperaturami. Zwłaszcza akumulator należy chronić przed nadmiernym działaniem ciepła.

Szkody materialne

• Po każdym użyciu dokładnie wytrzeć powierzchnię masującą zgodnie z opisem w rozdziale „Czyszczenie urządzenia”, aby uniknąć gromadzenia się tłuszczu i innych pozostałości.

• Do czyszczenia nie używać agresywnych lub szorujących powierzchni środków czyszczących, względnie twardych szczotek itp. Zwrócić uwagę, aby podczas czyszczenia do wnętrza urządzenia nie przedostała się wilgoć.

• Zasilacz sieciowy należy wyciągnąć z gniazda elektrycznego, jeśli w trakcie ładowania wystąpią zakłócenia, gdy urządzenie jest w pełni naładowane, w razie burzy oraz przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia. Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz sieciowy, a nie za kabel USB do ładowania.

• Nie wolno stosować niesprawnych/uszkodzonych zasilaczy sieciowych USB ani próbować ich naprawiać.

• Używane gniazdko musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz sieciowy. Ułożyć kabel USB do ładowania w taki sposób, aby uniemożliwić przypadkowe pociągnięcie urządzenia w dół.

• Nie wolno samodzielnie wymieniać ani demontować wbudowanego akumulatora. Istnieje niebezpieczeństwo eksplozji wskutek niewłaściwej wymiany akumulatora. W przypadku wymiany należy stosować tylko akumulator tego samego lub równoważnego typu. W przypadku, gdy akumulator jest uszkodzony, należy skontaktować się z zakładem specjalistycznym.

• Produkt zawiera akumulator litowo-jonowy. Nie wolno go rozbiierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.

• Akumulatorów nie wolno modyfikować ani deformować/podgrzewać/rozmontowywać. Uszkodzone akumulatory nie mogą mieć kontaktu z wodą.

• Kabel USB do ładowania nie może być zagięty ani przygnieciony. Kabel ten należy trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.

• Nie używać urządzenia lub nie podłączać go w celu ładowania do sieci elektrycznej w przypadku, gdy urządzenie lub kabel USB do ładowania wykazują widoczne uszkodzenia lub gdy urządzenie spadło z wysokości.

• Nie należy rozbiierać urządzenia na części mniejsze niż to opisano w niniejszej instrukcji obsługi. Nie wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Wszelkie naprawy urządzenia lub kabla USB do ładowania należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym.


Ładowanie akumulatora

Aby chronić akumulator przed uszkodzeniem, w chwili dostawy jest on naładowany jedynie w połowie. Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator.



OSTRZEŻENIE – zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym

- Nie ładować urządzenia bezpośrednio obok lub nad umywalką wypełnioną wodą.

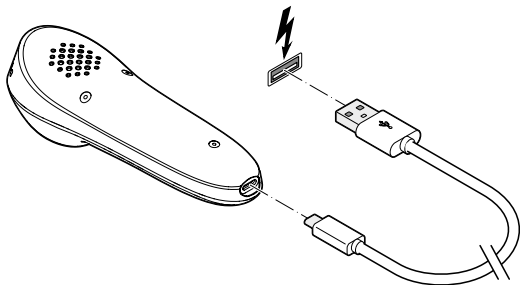

1. Podłączyć kabel USB do ładowania do urządzenia i zasilacza sieciowego USB (poza zakresem dostawy).
2. Włożyć zasilacz sieciowy do gniazda.

Ładowanie rozpoczyna się automatycznie.

Podczas ładowania kontrolka ładowania miga na czerwono. Naładować teraz akumulator do pełna, co zajmie około 2-3 godziny. Gdy tylko akumulator zostanie całkowicie naładowany, kontrolka ładowania zaświeci się na niebiesko.

3. Po zakończeniu ładowania odłączyć zasilacz sieciowy od gniazda i odłączyć kabel USB do ładowania od urządzenia. Lampka kontrolna ładowania zgaśnie.

Masażer twarzy jest teraz gotowy do użycia.

Przy całkowicie naładowanym akumulatorze urządzenie może być używane przez ok. 45 minut. Następnie należy ponownie ładować akumulator przez ok. 2-3 godziny.



- Nie można używać urządzenia podczas ładowania akumulatora.
- Aby utrzymać pełną pojemność akumulatora, należy nawet w przypadku nieużywania całkowicie naładować akumulator raz na 2-3 miesiące.
- Akumulator należy ładować w zakresie temperatur od +10°C do +40°C.

Użytkowanie



OSTRZEŻENIE – ryzyko obrażeń ciała

- Do oparzeń skóry może dochodzić już przy temperaturze 42°C! Dlatego masażer twarzy z włączoną funkcją ciepła nie może być używany zbyt długo w jednym miejscu.




- Początkowo należy stosować masażer twarzy jedynie przez krótki czas, aby ograniczyć ewentualne reakcje niepożądane do minimum.
- Zabieg nie powinien trwać dłużej niż 5 minut. Masażer twarzy wyłącza się automatycznie po ok. 2,5 minutach.
- Używać urządzenie maksymalnie dwa razy dziennie.
- Nie używać funkcji ciepła lub połączonej funkcji ciepła i wibracji dźwiękowych podczas noszenia makijażu. Jeśli na skórze znajduje się makijaż (podkład, puder, korektor),

upłynni się on pod wpływem ciepła. Późniejszy zabieg z użyciem ciepła wypcha mieszaninę cząsteczek makijażu, łój i zanieczyszczeń głęboko w szeroko otwarte pory. W wyniku tego zapychają się pory, co może prowadzić do powstawania zaskórników i wyprysków.

- Osoby o wrażliwej skórze mogą wykazywać reakcje w postaci obrzęków lub podrażnień skóry. Należy wcześniej ewentualnie wypróbować urządzenie w miejscu, które jest mniej wrażliwe, np. po wewnętrznej stronie przedramienia.

1. Najpierw oczyścić skórę starannie w celu usunięcia makijażu, zanieczyszczeń i nadmiernej ilości łój. Następnie starannie osuszyć twarz.
2. Nanieść wysokiej jakości serum, olejek do twarzy lub krem nawilżający. Dzięki temu urządzenie delikatnie przesuwając się po skórze, a cenne składniki aktywne są skutecznie wchłaniane przez skórę.

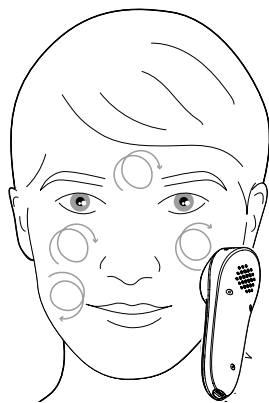

3. Włączyć funkcję ciepła i ewentualnie dodatkowo funkcję wibracji dźwiękowych (patrz rozdział „Włączanie/wyłączanie/przełączanie”) w zależności od tego, czy jest to odczuwane jako przyjemne i prowadzić powierzchnię masującą okrężnymi ruchami od środka do krawędzi twarzy.

4. Włączyć teraz funkcję chłodu i ewentualnie dodatkowo funkcję wibracji dźwiękowych i ponownie prowadzić powierzchnię masującą okrężnymi ruchami od środka do krawędzi twarzy.

Po zakończeniu zabiegu można nałożyć makijaż.

Po użyciu

- ▷ Po każdym użyciu należy dokładnie wyczyścić urządzenie, a w szczególności powierzchnię masującą, zgodnie z opisem w rozdziale „Czyszczenie”.

Włączanie/wyłączanie/przełączanie



Funkcje można ustawiać poprzez krótkie naciśnięcie przycisku  w następującej kolejności:
Ciepło -> Ciepło + funkcja wibracji dźwiękowej -> Zimno -> Zimno + funkcja wibracji dźwiękowej

Włączanie urządzenia funkcja ciepła (42°C)

Zabieg z użyciem ciepła (temperatura 42°C) może pobudzić krążenie krwi skóry twarzy, otworzyć pory i dzięki temu poprawić wchłanianie produktów pielęgnacyjnych.

- ▷ Przytrzymać przycisk  wciśnięty przez ok. 3 sekundy, aby włączyć masażer twarzy. Kontrolka HOT świeci się na czerwono. Powierzchnia masująca jest ciepła i gotowa do użycia po 3 sekundach.

Połączona funkcja ciepła i wibracji dźwiękowych

Funkcja wibracji dźwiękowych masuje i odpręża skórę.

- ▷ Naciśnąć przycisk  ponownie, aby dodatkowo do funkcji ciepła włączyć funkcję wibracji dźwiękowych. Kontrolka HOT świeci się na czerwono, a kontrolka SONIC na żółto. Powierzchnia masująca jest ciepła i wibruje.

Funkcja chłodu (6°C)

Zabieg z użyciem chłodu (temperatura 6°C) może zmniejszyć pory, ujędrnić skórę twarzy, zredukować zmarszczki i obrzęki.

- ▷ Naciśnąć przycisk  ponownie, aby włączyć funkcję chłodu. Kontrolka COOL świeci się na niebiesko. Powierzchnia masująca jest po 3 sekundach zimna i gotowa do użycia.

Połączona funkcja chłodu i wibracji dźwiękowych

- ▷ Naciśnąć przycisk  ponownie, aby dodatkowo do funkcji chłodu włączyć funkcję wibracji dźwiękowych. Kontrolka COOL świeci się na niebiesko, a kontrolka SONIC na żółto. Powierzchnia masująca jest chłodna i wibruje.

Wyłączanie urządzenia



Masażer twarzy może zostać wyłączony w każdej chwili, niezależnie od tego, jaka funkcja jest aktualnie ustawiona.

- ▷ Przytrzymać przycisk  wciśnięty przez ok. 3 sekundy, aby wyłączyć masażer twarzy.

Automatyczne wyłączanie

Masażer twarzy wyłącza się automatycznie po ok. 2,5 minutach.

Czyszczenie i przechowywanie

WSKAZÓWKA – szkody materialne

- Masażera twarzy nie można zanurzać w wodzie ani innych cieczach. Należy chronić urządzenie przedostaniem się do niego wilgoci.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.

- ▷ Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy je wyłączyć.
- ▷ Przetrzeć powierzchnię masującą miękką, wilgotną ściereczką. Zwrócić przy tym uwagę, aby wilgoć nie przedostała się do wnętrza urządzenia.
- ▷ W razie potrzeby wytrzeć rękojeść do czysta miękką, wilgotną ściereczką.
- ▷ Przed schowaniem (przechowywaniem) urządzenia należy ew. naładować akumulator. W ten sposób urządzenie będzie gotowe do następnego użycia.
- ▷ Urządzenie należy przechowywać w dołączonym woreczku w suchym miejscu, do którego dzieci nie mają dostępu.

Dane techniczne

Model:	717 936
Wejście:	5 V  1 A (symbol  oznacza prąd stały)
Akumulator:	litowo-jonowy 3,7 V 800 mAh Energia znamionowa: 2,96 Wh (przebadano wg UN 38.3) (bez możliwości wymiany)
Czas ładowania:	około 2-3 godzin
Maksymalny czas pracy (przy w pełni naładowanym akumulatorze):	ok. 45 minut
Klasa ochronności:	III 
Pobór prądu w stanie wyłączonym:	0,2 W
Zasilacz sieciowy (nieołączony):	Wejście: AC 100-240 V 50/60 Hz Wyjście: DC 5 V 1 A
Temperatura otoczenia:	od +10 do +40°C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.pl

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz wbudowany akumulator zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne wykorzystanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. **Opakowanie** należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, baterie i akumulatory, które oznaczone tym symbolem, nie mogą być wrzucane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do utylizacji zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieodpowiedniego składowania i niewłaściwej utylizacji mogą one stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach sprzedających baterie. Przed utylizacją należy zakleić taśmą styki baterii/akumulatorów litowych. Uwaga! To urządzenie zawiera akumulator, który ze względów bezpieczeństwa jest wbudowany na stałe i nie da się go wyjąć, nie niszcząc obudowy produktu. Nieprawidłowy demontaż akumulatora może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika. Z tego powodu należy przekazać zużyty produkt w stanie nieotwartym do punktu zbiórki, który zadba o właściwą utylizację urządzenia oraz zawartego w nim akumulatora.