



Minipistolet do masażu

pl Instrukcja obsługi

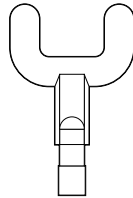


Kończówka widełkowa

Do masowania średnich grup mięśni, np. w okolicy kręgosłupa szyjnego czy na łydkach.

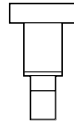


Mała końcówka płaska

Do masowania mniejszych grup mięśni, np. obszaru obręczy barkowej i karku.

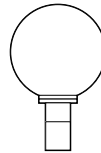

Kończówka kulkowa

Do masowania dużych grup mięśni, np. w obrębie uda lub pośladków.

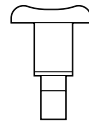


Kończówka wklęsła

Przydatna np. do masażu w obrębie ud, łokci lub rąk.



Kończówka stożkowa

Przeznaczona do masażu punktowego, np. punktów spustowych lub małych obszarów mięśni, np. na stopach oraz w okolicy nadgarstków.

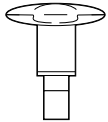

Kończówka krzyżowa

Przewidziana do zastosowań ogólnych na dużych grupach mięśni.

Wskazówki bezpieczeństwa



- Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

- Minipistolet do masażu jest przeznaczony do automasażu poprawiającego samopoczucie.
- Minipistolet do masażu został zaprojektowany do użytku prywatnego. Nie nadaje się on do stosowania w klinikach, gabinetach masażu, salonach wellness itp. Minipistolet do masażu nie jest wyrobem medycznym i nie służy do leczenia bólu.
- W razie wątpliwości lub niepewności prosimy przed użyciem skonsultować się z lekarzem.
- Produktu należy używać wyłącznie ...
 - ... do zastosowań zewnętrznych na ciele.
 - ... zgodnie z przeznaczeniem, w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Każde użycie niezgodne z przeznaczeniem może być niebezpieczne!

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci

- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od 14. roku życia i starsze, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy, o ile osoby te znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz zrozumiały ewentualne zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci bez nadzoru ze strony osoby dorosłej nie mogą przeprowadzać prac związanych z czyszczeniem ani konserwacją urządzenia.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Produkt nie jest zabawką. Dzieci nie mogą mieć do niego dostępu.

Aby nie narażać zdrowia, zdecydowanie odradza się stosowanie urządzenia w następujących przypadkach:

- Nie należy używać produktu ...
 - ... w przypadku zmian chorobowych w kręgosłupie.
 - ... w okresie ciąży.
 - ... w przypadku wystąpienia zmian chorobowych lub urazów w obszarach masażu (np. stłuczenia, stany zapalne, otwarte rany, wypadnięcie dysku itp.).
 - ... po zażyciu substancji, które powodują obniżenie zdolności postrzegania (np. środków przeciwbólowych, alkoholu).
 - ... do masowania oczu, okolic oczu, krtani, kości lub stawów, bezpośrednio na kręgosłupie, miejsc intymnych, nerek lub innych szczególnie wrażliwych części ciała.
 - ... podczas leżenia w łóżku.
 - ... przez pół godziny przed posiłkiem lub po posiłku.

- ... na zwierzętach.
- ... w przypadku widocznych uszkodzeń urządzenia.

Przed zastosowaniem urządzenia zasięgnąć porady lekarza, zwłaszcza w przypadku ...

- ... gdy użytkownik cierpi na ciężką chorobę lub ma za sobą operację chirurgiczną.
- ... posiadania rozrusznika serca, implantów lub innych aparatów wspomagających.
- ... jeśli użytkownik ma nieprawidłowe ciśnienie tętnicze lub wysoką gorączkę.
- ... zakrzepowego zapalenia żył.
- ... cukrzycy.
- ... w przypadku występowania bólu niewiadomego pochodzenia.
- Czas trwania masażu nie powinien być dłuższy niż 15 minut. Dłuższy masaż może prowadzić do nadmiernej stymulacji mięśni. W niektórych przypadkach może wówczas dojść do napięcia mięśni zamiast do ich rozluźnienia.
- Jeżeli podczas używania urządzenia pojawiają się bóle lub wysypka skórna, należy natychmiast zakończyć masaż i nie używać więcej produktu.

Należy przestrzegać następujących zasad bezpiecznego użytkowania:

- Nie wolno wkładać do produktu żadnych ostrych ani spiczastych przedmiotów, np. agrałek itp.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. W przypadku nieprawidłowego działania lub uszkodzenia produktu należy zlecić jego naprawę zakładowi specjalistycznemu.
- Nigdy nie wolno pozostawiać włączonego produktu bez nadzoru.

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

- Produkt może być ładowany wyłącznie w suchych pomieszczeniach. Do ładowania należy używać odpowiedniego zasilacza sieciowego USB (patrz „Dane techniczne”, nie wchodzi w zakres dostawy) oraz wyłącznie dołączonego w komplecie kabla do ładowania USB-C/USB-A.
- Nie należy używać ani ładować produktu w pobliżu wody. Urządzenie nie może mieć kontaktu z wodą ani innymi cieczami, gdy jest podłączone do sieci elektrycznej. Podczas ładowania nie wolno zanurzać produktu w wodzie lub innych cieczach, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- Trzymać produkt z dala od wody i wilgoci, nawet jeżeli nie jest ładowany.
- Zasilacz sieciowy należy wyciągnąć z gniazdka elektrycznego, jeśli w trakcie ładowania wystąpią zakłócenia, gdy urządzenie jest w pełni naładowane, w czasie burzy oraz przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia.

OSTRZEŻENIE przed pożarem/wybuchem

- Urządzenie zawiera wbudowany na stałe akumulator litowo-jonowy. Nie wolno wrzucać urządzenia do ognia. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!
- W trakcie procesu ładowania produkt nagrzewa się. Nie wolno wtedy przykrywać produktu.

- Nie wolno ładować produktu w pobliżu gazów wybuchowych.
- Nie wolno narażać produktu na działanie otwartego ognia, wilgoci, wysokich temperatur, bezpośredniego światła słonecznego itp. Istnieje niebezpieczeństwo przegrzania, wybuchu i powstania zwarcia.
- Nie wolno używać produktu w przypadku, gdy sam produkt i/lub dołączony w komplecie kabel do ładowania USB-C/USB-A wykazują widoczne uszkodzenia.
- Poza wymianą końcówek do masażu nie wolno wprowadzać żadnych zmian w urządzeniu. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą stwarzać poważne zagrożenie dla użytkownika.
- Akumulator jest wbudowany na stałe. Nie ma możliwości jego samodzielnej wymiany ani nie wolno tego robić. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu wskutek niewłaściwej wymiany akumulatora! W przypadku, gdy akumulator jest uszkodzony, należy skontaktować się z zakładem specjalistycznym.

UWAGA - ryzyko odniesienia lekkich obrażeń ciała i strat materialnych

- Nie wolno włączać urządzenia bez założonej końcówki do masażu.
- Podczas używania urządzenia należy trzymać od niego z daleka długie włosy, łańcuszki itp.
- Nie używać urządzenia pod kocem lub innym przykryciem. Może dojść do przegrzania.
- Produkt należy chronić przed kurzem/pyłem, wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami.
- Nie wolno siadać na produkcie! Nie wolno też kłaść na nim żadnych ciężkich przedmiotów. Spowoduje to uszkodzenie produktu.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.

Dane techniczne

Model:	A004874
Numer artykułu:	632 859
Akumulator:	litowo-jonowy 3,7 V  4500 mAh (przebadano wg UN 38.3) (symbol  oznacza prąd stały) energia znamionowa: 16,2 Wh ± 10%
Czas ładowania:	ok. 3,5 godziny
Maks. czas działania:	ok. 120 minut (przy w pełni naładowanym akumulatorze i najwyższej prędkości masażu)

Klasa ochronności: III 

Temperatura otoczenia: od +10°C do +40°C


Producent: Lenco Benelux BV,
Thermiekstraat 1a,
6361 HB Nuth,
The Netherlands (Holandia)




W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.

Ładowanie

Aby chronić akumulator przed uszkodzeniem, w chwili doładowania jest on naładowany jedynie w połowie. Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator.

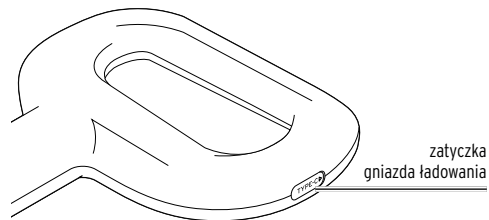

1. Otworzyć gniazdo ładowania, zdejmując zatyczkę.

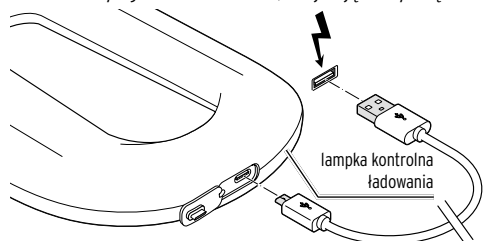

2. Włożyć wtyczkę dołączonego w komplecie kabla do ładowania USB-C/USB-A do gniazda ładowania w urządzeniu.

3. Połączyć kabel do ładowania USB-C/USB-A z odpowiednim zasilaczem sieciowym USB, a następnie włożyć ten zasilacz do gniazdka elektrycznego. Wbudowana lampka kontrolna ładowania świeci na czerwono.

4. Akumulator jest w pełni naładowany, gdy lampka kontrolna ładowania świeci na zielono. Wyciągnąć wtedy zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego oraz kabel do ładowania USB-C/USB-A z gniazda ładowania.


5. Ponownie zamknąć gniazdo ładowania zatyczką.

Czas ładowania całkowicie rozładowanego akumulatora wynosi ok. 3,5 godziny.


Czas działania urządzenia przy całkowicie naładowanym akumulatorze i maksymalnej prędkości masażu wynosi ok. 120 godzin.

i Aby jak najdłużej utrzymać pełną wydajność akumulatora, należy go całkowicie naładować raz na trzy miesiące, nawet jeśli nie jest on używany. Czas działania akumulatora jest najdłuższy w normalnej temperaturze pokojowej. Im niższa temperatura, tym krótszy czas działania akumulatora.

Obsługa

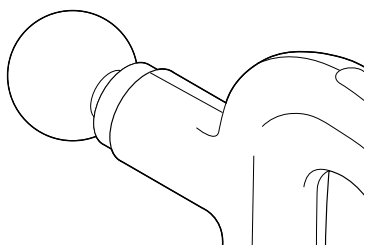

1. Włożyć żądaną końcówkę do masażu w przewidziane na nią gniazdo w urządzeniu.

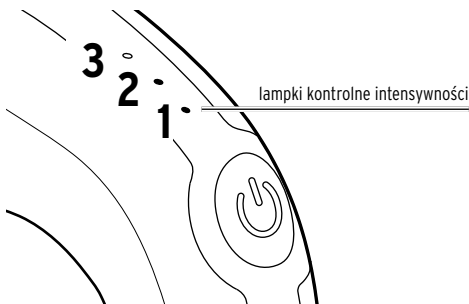

2. Naciśnąć przycisk ...

1 raz, aby włączyć urządzenie z niską intensywnością masażu,

2 razy, aby włączyć średnią intensywność masażu,

3 razy, aby włączyć wysoką intensywność masażu albo

4 razy, aby wyłączyć urządzenie.

W zależności od ustawionej intensywności masażu świeci odpowiednia liczba lampek kontrolnych intensywności (niska = 1, średnia = 2, wysoka = 3).

Gdy urządzenie zostanie wyłączone, lampki kontrolne intensywności gasną.


3. Prowadzić końcówkę do masażu powoli i okrężnymi ruchami (w zależności od używanej końcówki) po masowanej części ciała.



• Podczas masażu nie należy zbyt mocno dociskać urządzenia do skóry.

• Nigdy nie wolno przetrzymywać urządzenia przez dłuższy czas w jednym miejscu.

• **Nie należy stosować urządzenia bezpośrednio na kręgosłupie.** Jeśli używana jest końcówka widełkowa, należy prowadzić ją po plecach w taki sposób, aby widełki końcówki znajdowały się obok kręgów.

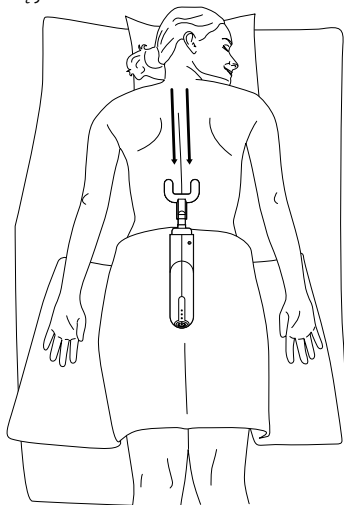

Czas trwania masażu nie powinien być dłuższy niż 15 minut. Urządzenie wyłącza się automatycznie po 15 minutach działania.

▷ Po użyciu należy wyciągnąć końcówkę do masażu z gniazda urządzenia.

Czyszczenie

- ▷ Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy odłączyć go od sieci elektrycznej i wyłączyć.
- ▷ Przetrzeć urządzenie oraz końcówki do masażu lekko zwilżoną ściereczką.
- ▷ Przechowywać urządzenie w suchym miejscu, do którego dzieci nie mają dostępu.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Nie można włączyć urządzenia.

- Czy akumulator musi zostać naładowany?

Nie można naładować urządzenia.

- Sprawdzić połączenia wtykowe między urządzeniem, kablem do ładowania USB-C/USB-A, zasilaczem sieciowym i gniazdkiem elektrycznym.
- Wyciągnąć na chwilę zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego i odłączyć kabel do ładowania USB-C/USB-A, a następnie spróbować ponownie.

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz wbudowany akumulator wyprodukowano z wartościowych materiałów, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być wrzucane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udziela administracja samorządowa.



Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

Uwaga! To urządzenie zawiera akumulator, który ze względów bezpieczeństwa jest wbudowany na stałe i nie może zostać wyjęty bez zniszczenia obudowy produktu. Nieprawidłowy demontaż akumulatora może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika. Z tego powodu należy przekazać zużyty produkt w stanie nieotwartym do punktu zbiórki, który zadba o właściwą utylizację produktu oraz zawartego w nim akumulatora.