


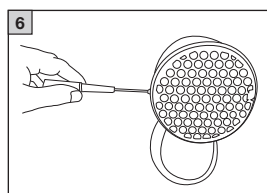
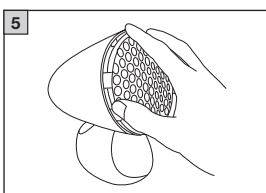


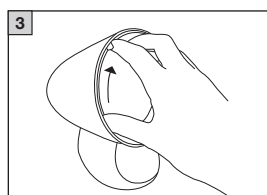

CS	Infračervená lampa	
	Návod k použití	3
SK	Infračervená lampa	
	Návod na použitie	9

A

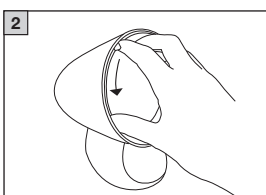

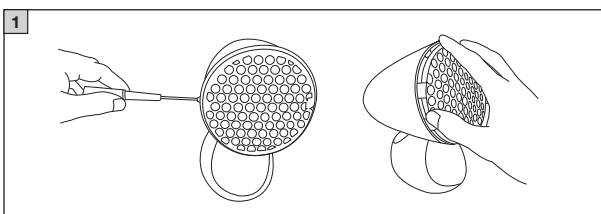

Tento návod k použití si pečlivě prostudujte. Dodržujte varovné a bezpečnostní pokyny. Návod k použití uschovejte pro pozdější použití. Zajistěte, aby návod k použití byl přístupný jiným uživatelům. Při předání přístroje předejte i tento návod k použití.

Obsah

1. Obsah balení	3	7. Čištění a údržba	6
2. Vysvětlení symbolů	3	7.1 Čištění	6
3. Použití v souladu s určením	3	7.2 Výměna infračervené lampy	6
4. Varovné a bezpečnostní pokyny	4	7.3 Uložení	6
5. Uvedení do provozu	5	8. Náhradní díly a díly podléhající opotřebení	7
5.1 Před uvedením přístroje do provozu	5	9. Co dělat v případě problémů?	7
5.2 Vybavení a instalace	5	10. Likvidace	7
5.3 Příprava ošetření	6	11. Technické údaje	7
5.4 Délka ošetření	6	11.1 Infračervená lampa	7
6. Použití	6	11.2 Ochranné brýle	7
6.1 První použití	6	12. Záruka	8
6.2 Po ozařování	6		

1. OBSAH BALENÍ

Zkontrolujte, zda je obsah balení uložen v neporušeném obalu a zda je kompletní. Před použitím se ujistěte, zda přístroj a dodané komponenty nevykazují žádná viditelná poškození a zda jsou odstraněny veškeré obaly. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo na uvedenou adresu zákaznického servisu.

- 1 infračervená lampa
- 1 ochranné brýle
- 1 tento návod k použití

2. VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

Na přístroji, v návodu k použití, na obalu a typovém štítku přístroje jsou použity následující symboly:

VAROVÁNÍ

Označuje možné hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, může dojít ke smrti nebo závažným zraněním.

UPOZORNĚNÍ

Označuje potenciálně škodlivou situaci. Pokud se jí nevyhnete, může dojít k poškození přístroje nebo předmětů v okolí.



Pozor

Ukazuje, že je nutné dávat velký pozor, jestliže se v blízkosti tohoto symbolu používají další zařízení nebo regulátory, nebo že aktuální situace vyžaduje pozornost či zásah uživatele, aby se zabránilo nežádoucím následkům



Dodržujte návod

Před zahájením práce a/nebo obsluhy přístrojů nebo zařízení si přečtěte návod



Likvidace podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)



Výrobce



Označení CE

Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic.



Značka pro identifikaci obalového materiálu. A = zkratka materiálu, B = číslo materiálu: 1-7 = plasty, 20-22 = papír a lepenka



Produkt a součásti obalu roztrháte a zlikvidujete je v souladu s místními předpisy.



Přístroj třídy ochrany II

Přístroj má dvojnásobnou ochrannou izolaci, a splňuje tak třídu ochrany 2.



Chraňte před vlhkem



Sériové číslo



Přípustná teplota a vlhkost vzduchu při skladování



Přípustná provozní teplota a vlhkost vzduchu



Omezení tlaku vzduchu



Nehleďte do světelného zdroje



Je nutné nosit neprůhlednou ochranu očí



Pozor, infračervené záření



Pozor, horký povrch



Švýcarský zplnomocněný zástupce

3. POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM

Zamýšlené použití

Tato infračervená lampa je určena pouze k ozařování lidského těla. Ozařováním infračerveným světlem se do těla člověka transportuje teplo.

Cílová skupina

Tento přístroj je určen pro vlastní potřebu v domácím prostředí, ne v profesionálních zdravotnických zařízeních. Aplikace je vhodná pro

všechny dospělé osoby, které netrpí poruchami smyslového vnímání a jsou při plném vědomí.

Klinický přínos

Infračervenou lampou může uživatel zahřát určitá místa pokožky infračerveným světlem. Tím se ožářená pokožka silněji prokrvuje a látková výměna se teplem zvyšuje. Tělo je účinky infračerveného světla stimulováno k léčení. Cílené jsou podporovány hojivé procesy.

Indikace

Uživatel může přístroj používat jako doprovodou léčbu při léčbě těchto onemocnění:

- ORL onemocnění, např. akutní rinitida
- Akné
- Svalové napětí, např.
 - Nežánlivá degenerativní onemocnění měkkých tkání (myalgie, myogelóza, myotendopatie, fibrositida)
 - Artralgie u artrózy
 - Revmatická onemocnění kloubů (ne při vzplanutí zánětu)

Kontraindikace

▲ VAROVÁNÍ

- Tento přístroj není určen k používání osobami s omezeními fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí. Tyto osoby smí přístroj používat pouze tehdy, jsou-li v zájmu své bezpečnosti pod dohledem kompetentní osoby nebo od ní získaly instrukce, jak mají přístroj používat, aby se zabránilo riziku požáru nebo popálení.
- **NEPOUŽÍVEJTE** tento přístroj u osob se sníženou citlivostí na teplo.
- Citlivost na teplo může být omezena nebo zvýšena v těchto případech:
 - u diabetických pacientů,
 - u osob s paraplegií,
 - u osob trpících ospalostí, demencí nebo poruchami koncentrace,
 - u osob s onemocněním projevujícím se změnami na kůži,
 - u osob s jizvami na kůži v oblasti aplikace,
- Toto zařízení **NEPOUŽÍVEJTE** v těchto případech:
 - při akutní revmatoidní artritidě,
 - při infekční artritidě,
 - při poruchách prokrvení,
 - při dekompenzované srdeční insuficienci nebo závažné poruše srdečního rytmu,
 - při akutním nebo nedávném infarktu myokardu,
 - při dekompenzované diabetes mellitus, hypertenze, insuficienci kůry nadledvin,
 - při infekcích,
 - na otevřených ranách,
 - při silných otocích,
 - při radioterapii (vč. tří měsíců po léčbě),
 - při poruchách citlivosti v ošetřované oblasti,
 - u dětí a starších osob,
 - po požití léků nebo alkoholu.
- Nepoužívejte přístroj, pokud máte voperovaný nějaký implantát, zejména nachází-li se v blízkosti ošetřované části těla. V případě pochybností se obraťte na svého lékaře.
- Pokud jste těhotná, nepoužívejte přístroj blízko podbřišku, aby nedošlo k přehřátí této části těla. V případě pochybností se obraťte na svého lékaře.
- Tento přístroj není určen pro děti. Děti by měly být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály, hrozí nebezpečí požáru nebo popálení.

Nežádoucí reakce

- Léky, kosmetické přípravky nebo potraviny mohou za určitých okolností vyvolat precitlivělou nebo alergickou reakci pokožky. V takovém případě je třeba ozařování okamžitě ukončit.

- Během ošetření musí být dodržena přiměřená vzdálenost mezi infračervenou lampou a požadovaným ošetřovaným místem, aby nedošlo k podráždění pokožky, např. brnění, svědění, pálení nebo příliš vysoké citlivosti na teplo. Pokud k tomu dojde, přerušte aplikaci. Případně zvětšete vzdálenost ozařování a/nebo zkrátte dobu ozařování.
- Delší používání může způsobit popáleniny kůže.

Používání ochranných brýlí v souladu s určením

Ochranné brýle jsou určeny výhradně k ochraně očí před infračervenými paprsky během používání infračáře. Ochranné brýle chrání pouze před infračervenými paprsky. Ochranné brýle **NECHRÁNÍ** před jiným zářením. Ochranné brýle používejte pouze v kombinaci s infračervenou lampou beurer. Nepoužívejte ochranné brýle v kombinaci s infrazářiči jiných výrobců.

Noste ochranné brýle vždy přímo na očích a ne přes jiné brýle. Ochranné brýle jsou určeny pouze pro použití v domácím/soukromém prostředí, ne v komerční oblasti.

Ochranné brýle nejsou vhodné k použití jako ochrana očí proti mechanickým vlivům (např. před nárazy).

Neobsahují škodlivé látky a odpovídají zákonným předpisům.

4. VAROVNÉ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Elektrická bezpečnost

▲ VAROVÁNÍ

- Jakékoliv neodborné použití může být nebezpečné!
- Před připojením zařízení k síti zkontrolujte, zda se napětí uvedené na zařízení shoduje s napětím místní elektrické sítě, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem nebo trvalého poškození zařízení.
- Používejte snadno přístupnou síťovou přípojku, abyste v případě potřeby mohli rychle vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
- Nikdy se nedotýkejte síťové zástrčky mokřima rukama, nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Síťový kabel vedte tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout.
- Vždy vytahujte zástrčku ze zásuvky, jestliže přístroj nepoužíváte, čistíte nebo v případě poruchy, tvorby kouře a zápachu. Při vytahování ze zásuvky tahajte za zástrčku – ne za kabel!
- Dávejte pozor při manipulaci se síťovým kabelem (nebezpečí uškrcení a udušení).
- Před použitím se ujistěte, zda přístroj a jeho součásti nevykazují žádná viditelná poškození. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo na uvedenou adresu zákaznického servisu. Platí to zejména pro škrábance na filtrační desce nebo trhliny v krytu přístroje.
- V případě poškození síťového kabelu a krytu přístroje se obraťte na zákaznický servis nebo na příslušného prodejce, protože při nedodržení tohoto ustanovení hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Odpojení z elektrické sítě je zajištěno pouze v případě, že je síťová zástrčka vytažena ze zásuvky.
- Jestliže dojde k poškození síťového kabelu u tohoto přístroje, musíte ho odstranit. Pokud ho nelze vyjmout, musíte zlikvidovat přístroj.
- Síťový kabel nikdy neobtáčejte kolem infračervené lampy.

Bezpečnostní pokyny na ochranu zdraví

▲ VAROVÁNÍ

- Nebezpečí popálení! Osvětlovací prostředek a kryt přístroje se při provozu přístroje silně zahřívají. Při dotyku hrozí nebezpečí popálení!
- Nechte přístroj vychladnout a pak se ho můžete dotýkat.
- Když budete chtít přístroj zabalit, vytáhněte vždy zástrčku ze zásuvky a nechte přístroj vychladnout.
- Jestliže je přístroj zapnutý, nesmíte se ho dotýkat vlhkými rukama.

- Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte tento přístroj ve vlhkém prostředí (např. v koupelně nebo v blízkosti sprchy nebo bazény).
- **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**
 - Zabráňte vniknutí vody do zařízení.
 - Na přístroj nesmí stříkat voda.
 - Přístroj můžete používat jen tehdy, pokud je úplně suchý.

Bezpečná manipulace

▲ VAROVÁNÍ

- Tento přístroj není určen pro komerční použití, nýbrž výhradně pro použití v domácnosti!
- Infračervené záření z tohoto přístroje může vést k podráždění očí. Nedívejte se do zdroje světla a používejte přiložené ochranné brýle.
- Obalový materiál nenechávejte v dosahu dětí (nebezpečí udušení).
- Během aplikace vždy používejte přiložené ochranné brýle.
- Infračervenou lampu používejte vždy s nasazenou ochrannou mřížkou.
- Během používání nikdy nedemontujte ochrannou mřížku. Ochrannou mřížku vyjměte pouze při výměně infračervené lampy.
- Nepoužívejte u kojenců a batolat.
- Tento přístroj není určen pro použití na přebalovacích pultech, v dětských postýlkách a podobně.
- Nikdy nepoužívejte přístroj v blízkosti vody.
- Pokud vám přístroj spadne nebo dojde k jeho poškození následkem pádu, nelze ho již dál používat.
- Přístroj se nesmí vkládat do vody nebo jiných kapalin a nesmí do něj vniknout žádná tekutina.
- Během provozu nenechávejte přístroj bez dozoru, abyste předešli riziku požáru a popálení.
- Okamžitě přístroj vypněte, pokud je poškozený nebo objeví-li se nějaká porucha.
- Po použití a při výpadku proudu vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, aby nedošlo k poškození přístroje.
- Když je zásuvka, ke které je zařízení připojeno, špatně zapojena, bude zástrčka zařízení horká. Zajistěte, aby byl přístroj připojen do správné nainstalované zásuvky, aby se zabránilo nebezpečí požáru a popálení.

Důležitá upozornění

▲ VAROVÁNÍ

- Vzdálenost od zářiče se zásadně řídí individuální citlivostí na teplo a příslušnou terapií. Čím větší je vzdálenost mezi vámi a přístrojem, tím větší je ošetřovaná oblast a tím nižší je teplo infračerveného světla. Při menší vzdálenosti se zmenšuje i ošetřovaná oblast a intenzita tepla infračerveného světla se zvětšuje.
- Omezte délku používání a kontrolujte reakci kůže.
- Používejte infračervenou lampu pouze v takové vzdálenosti, abyste během ošetření nepocitovali žádné podráždění kůže, např. mravenčení, svědění, pálení nebo pocit příliš velkého tepla. V takovém případě přerušete ošetřování. Případně zvětšíte vzdálenost a/nebo zkrátte dobu ošetření.
- Tento přístroj není určen k ozařování shora.
- Produkt není vhodný k osvětlení místností v domácnosti.
- Abyste zabránili neúmyslnému kontaktu s horkým osvětlovacím prostředkem, dbejte na to, aby byla vzdálenost mezi vámi a přístrojem dostatečně velká. Zvolte vzdálenost od přístroje tak, aby vám teplo bylo příjemné.
- Léky, kosmetické přípravky nebo potraviny mohou za určitých okolností vyvolat precitlivělou nebo alergickou reakci pokožky. V takovém případě ozařování ihned ukončete.
- Při dlouhodobém používání přístroje se vyžaduje obzvláštní opatrnost a pozornost.

- Nepoužívejte přístroj, jestliže jste unaveni a hrozí nebezpečí, že byste během ozařování usnuli!
- Příliš dlouhé ozařování by mohlo případně způsobit popáleniny kůže.
- Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při používání elektrických přístrojů. Zajistěte, aby děti nepoužívaly přístroj bez dozoru.
- Nepoužívejte přístroj ve vlhkém nebo prašném prostředí.

Varovné a bezpečnostní pokyny pro ochranné brýle

▲ VAROVÁNÍ

- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí udušení.
- Děti si s ochrannými brýlemi nesmí hrát.
- Před použitím zkontrolujte, zda nejsou ochranné brýle poškozené (např. trhliny nebo díry). Jestliže by ochranné brýle byly poškozené, NESMÍTE je používat.
- Nepoužívejte ochranné brýle, které byly vystaveny nárazům; je třeba je zlikvidovat a vyměnit.
- Materiál ochranných brýlí, který se může dostat do kontaktu s kůží uživatele, by mohl u osob s citlivou pokožkou vyvolat alergické reakce.
- Dbejte na to, aby se ochranné brýle nedostaly do kontaktu s tuky, oleji nebo alkoholem (např. čistícími prostředky nebo pleťovou vodou).
- Používejte ochranné brýle pouze v klidném prostředí, abyste se během používání lampy ničím nerozptylovali.
- Ochranné brýle nejsou vhodné pro řízení nebo silniční provoz

Opavy

▲ VAROVÁNÍ

- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Přístroj smíte otvírat pouze za účelem výměny infračervené lampy. Před výměnou infračervené lampy vytáhněte síťový kabel ze zásuvky! Přístroj nesmíte nikdy otvírat nebo opravovat, jinak již nelze zaručit jeho správné fungování. V případě nedodržení těchto pokynů záruka zaniká.
- Přístroj nikdy nepoužívejte během údržby.
- S opravami se obraťte na zákaznický servis nebo autorizovaného prodejce.

5. UVEDENÍ DO PROVOZU

5.1 Před uvedením přístroje do provozu

UPOZORNĚNÍ

- Před použitím odstraňte veškerý obalový materiál.
- Kontrolujte přístroj, zda nejeví známky opotřebení nebo poškození. V případě pochybností poškozený přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo na uvedený zákaznický servis.
- Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným nebo nevhodným používáním.
- Před použitím zkontrolujte, zda je osvětlovací prostředek bezpečně nasazen.
- Chraňte přístroj před prachem, nečistotami a vlhkostí.

5.2 Vybalení a instalace

▲ VAROVÁNÍ

- Přístroj nesmí ležet nebo stát nakřivo.
- Vždy dbejte na to, aby přístroj stál bezpečně na rovném podkladu.
- Minimální vzdálenost mezi hořlavými předměty a infračervenou lampou nesmí být menší než 1 metr.

- Dbejte na to, aby přístroj nestál na hořlavých předmětech, např. na ubrusech nebo kobercích.
- Do blízkosti přístroje nepokládejte žádné lehce zápalné nebo tavící se předměty.
- Přístroj nezavěšujte na zeď nebo na strop.
- Přístroj nepoužívejte venku.
- Chraňte přístroj před silnými nárazy, abyste předešli poškození lampy. Platí to pro i pro necitlivou instalaci.
- Sítový kabel zcela odmotejte.

UPOZORNĚNÍ

Během provozu a fáze ochlazování zabraňte nárazům, protože by mohly způsobit poškození infražáříče.

1. Přístroj postavte na stabilní a rovnou plochu.
2. Sítovou zástrčku zapojte do zásuvky.

5.3 Příprava ošetření

1. Zaujměte takovou polohu před přístrojem, abyste byli při ozařování příslušné části těla úplně uvolnění.
2. Sklopením infračervené lampy nastavte optimální směr přístroje k ošetřované části těla. Vzdálenost od zářiče se zásadně řídí individuální citlivostí na teplo a příslušnou terapií.
3. Zvolte vzdálenost od přístroje tak, aby vám teplo bylo celou dobu příjemné. Pokud máte pocit, že je teplo na pokožce příliš velké, zvětšete vzdálenost od přístroje.
4. Během aplikace vždy používejte přiložené ochranné brýle. Ochranné brýle odpovídají požadavkům normy EN ISO 16321-1:2022 a slouží k ochraně očí.

VAROVÁNÍ

Bez ochranných brýlí se nikdy nedívejte přímo do infračerveného světla.

Nepoužívejte přístroj déle než 15 minut, nebezpečí přehřátí! Před dalším použitím nechte přístroj nejdříve vychladnout.

5.4 Délka ošetření

VAROVÁNÍ

Nebezpečí popálení: Před zapnutím přístroje odstraňte z ošetřované oblasti kovové díly, např. spony u opasků, řetízky na krk, podprsenky, šperky nebo piercing, neboť by se mohly silně zahřát.

Zpočátku doporučujeme kratší dobu ozařování. Kůže u jednotlivých lidí však může i při správném použití přístroje zareagovat na tepelné záření přecitlivěle (např. silné zarudnutí, tvorba puchýřů, svědění, silné pocení nebo alergická reakce).

Pokud ani po 6 až 8 ošetření nedojde ke zmírnění bolesti, přístroj již nepoužívejte a obraťte se na svého lékaře.

6. POUŽITÍ

6.1 První použití

VAROVÁNÍ

Během ošetření vždy používejte přiložené ochranné brýle. Pravidelně kontrolujte ozařovanou část těla a reakci kůže. Při náznacích přecitlivěle nebo alergické reakce ihned ukončete ozařování a poraďte se s lékařem. Nikdy se nedívejte přímo do zapnuté infračervené lampy.



Nebezpečí popálení! Během ošetření se nikdy nedotýkejte horkého osvětlovacího prostředku.

1. Přidrže si ochranné brýle na očích a přetáhněte gumový pásek přes hlavu. Gumový pásek můžete individuálně nastavit.
2. Sítovou zástrčku zapojte do vhodné zásuvky. Infračervená lampa se rozsvítí.
3. Nyní můžete začít s aplikací.

4. Pro ukončení ošetření vytáhněte sítovou zástrčku ze zásuvky.
5. Sundejte si ochranné brýle. Nechte přístroj vychladnout.

6.2 Po ozařování

VAROVÁNÍ

- Infračervená lampa je po použití horká. Nechejte infračervenou lampu dostatečně dlouhou dobu vychladnout, než se jí dotknete!
- Respektujte, že se sítový kabel nesmí omotávat kolem infračervené lampy, ani při uskladnění, ani při provozu!
- Sítovou zástrčku musíte po použití vytáhnout ze zásuvky, aby se přístroj úplně vypnul.
- Pokud je přístroj zahřátý, nesmíte ho zakrývat nebo vkládat do obalu k uschování.

7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

7.1 Čištění

VAROVÁNÍ

Před každým čištěním musí být přístroj vypnutý, odpojený od elektrické sítě a úplně vychladlý.

UPOZORNĚNÍ

- Dbejte na to, aby se do vnitřní části přístroje nedostala žádná voda!
- Přístroj neumývejte v myčce na nádobí!

Přístroj můžete očistit navlhčenou utěrkou. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky s obsahem rozpouštědel. Po každém použití je třeba přístroj vyčistit.

Ochranné brýle občas očistěte. K čištění použijte lehce navlhčenou měkkou utěrkou. Nepoužívejte žádné agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

7.2 Výměna infračervené lampy

Respektujte, že jako náhrada za vadnou infračervenou lampu se smí používat pouze infračervená lampa stejného typu.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Před výměnou infračervené lampy vytáhněte sítový kabel ze zásuvky!
- Nebezpečí popálení o horké povrchy!
- Před zahájením opravy nechte přístroj úplně vychladnout!
- Infračervené osvětlovací prostředky jsou ze záruky vyloučeny.

Při výměně infračervené lampy postupujte takto **A**:

1. Nejprve odstraňte ochrannou mřížku tak, že šroubovákem odšroubujete boční šroub a opatrně stáhnete ochrannou mřížku z přístroje.
2. Vyšroubujte starou infračervenou lampu z přístroje.
3. Zašroubujte novou infračervenou lampu do přístroje.
4. V případě potřeby omyjte navlhčenou utěrkou s trochou prostředku na mytí nádobí přední stranu infračervené lampy.
5. Na přístroj znovu nasadte ochrannou mřížku.
6. Šroubovákem pevně utáhněte boční šroub na ochranné mřížce.
7. Zkontrolujte, zda je ochranná mřížka správně upevněna na přístroji.

7.3 Uložení

1. Než budete s přístrojem pohybovat, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte přístroj úplně vychladnout.
2. Pokud ochranné brýle nebudete delší dobu používat, doporučujeme je uložit v originálním obalu v suchém prostředí a ničím je nezátěžovat.

3. Přístroj uchovávejte nejlépe v originálním balení na suchém místě.

8. NÁHRADNÍ DÍLY A DÍLY PODLÉHAJÍCÍ OPOTŘEBENÍ

Náhradní díly a díly podléhající opotřebení naleznete na internetových stránkách www.beurer.com nebo kontaktujte příslušný servis ve své zemi (podle adres servisních středisek).

Náhradní zářič / typ:	Technické údaje:	Číslo výrobku:
Infrared R95 (100 W)	230V ~ 50 Hz	614.51
Náhradní díl:	Číslo výrobku:	
ochranné brýle	200.593	

9. CO DĚLAT V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ?

Problém	Možná příčina	Odstranění
Infračervená lampa nesvítí	Žádný proud	Síťovou zástrčku zapojte správně do zásuvky.
	Překročena doba svícení infračervené lampy	Infračervená lampa je vadná. Obratě se na zákaznický servis nebo svého prodejce.
	Po výměně infračervené lampy nebyla nová infračervená lampa správně vložena.	Podle popisu v kapitole 7.2 zkontrolujte, zda byla nová infračervená lampa správně vložena.

10. LIKVIDACE

V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem. Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. Dodržte místní předpisy pro likvidaci materiálů. Přístroj zlikvidujte podle směrnice EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud se chcete na něco zeptat, obraťte se na příslušný obecní úřad, který má likvidaci na starosti. Adresy míst zpětného odběru odpadních zařízení vám poskytnou např. místní orgány státní správy, místní podniky zabývající se likvidací odpadu nebo prodejce přístroje.




11. TECHNICKÉ ÚDAJE

11.1 Infračervená lampa

Připojení k síti	AC 220 - 230 V / 50 - 60Hz
Příkon	100 W
Skupina nebezpečí	Skupina nebezpečí 2, střední skupina nebezpečí
Max. Intenzita záření podle EN 62471	<3200 W/m²
Rozměry (š x v x h)	180 x 122 x 205 mm
Hmotnost	cca 331 g
Provozní podmínky	Teplota: 5 °C až 35 °C Relativní vlhkost vzduchu: 15 % - 93 %, Okolní tlak: 700 hPa - 1060 hPa
Skladovací a přepravní podmínky	Teplota: -25 °C až +70 °C Relativní vlhkost vzduchu: ≤ 93 %
Vysílaný rozsah infračervených vlnových délek	IRA + IRB / 780-3000 nm

Třída ochrany	II.
Očekávaná doba svícení osvětlovacího prostředku	300 hodin
Bezpečná vzdálenost pro oko	14,6 cm
Stupeň krytí IP	IP20
Očekávaná životnost přístroje	Informace o životnosti výrobku naleznete na domovské stránce

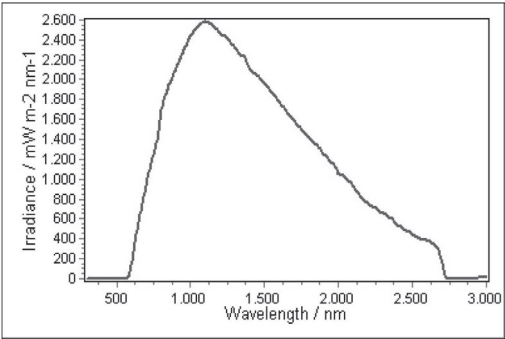

Při použití přístroje mimo specifikaci není zaručeno jeho správné fungování! Technické změny v rámci zlepšování a dalšího vývoje výrobku jsou vyhrazeny.

Tento přístroj odpovídá evropské normě EN 60601-1-2 (Skupina 1, třída B, v souladu s CISPR 11, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-39) a podléhá speciálním bezpečnostním opatřením z hlediska elektromagnetické kompatibility. Nezapomeňte, že přenosná a mobilní vysokofrekvenční komunikační zařízení mohou mít vliv na tento přístroj. Přesnější údaje si můžete vyžádat na uvedených adresách zákaznického servisu. Tento přístroj odpovídá požadavkům evropské směrnice pro zdravotnické prostředky 93/42/EEC včetně jejích doplňků a zákonu o zdravotnických prostředcích.

Sériové číslo se nachází na přístroji nebo v přihrádce na baterie.

Poznámky k elektromagnetické kompatibilitě

- Přístroj je vhodný pro použití ve všech prostředích, která jsou uvedena v tomto návodu k použití, včetně domácího prostředí.
- Přístroj lze při výskytu elektromagnetických poruchových veličin používat podle okolností jen v omezené míře. V důsledku toho se mohou například objevit chybová hlášení nebo může dojít k výpadku displeje/přístroje.
- Nepoužívejte přístroj v bezprostřední blízkosti jiných přístrojů nebo s přístroji naskládanými na sobě, neboť by mohlo dojít k chybné funkci. Pokud by však bylo použití ve výše uvedené podobě nutné, měli byste tento přístroj i ostatní přístroje sledovat a přesvědčit se, že pracují správně.
- Používání jiných náhradních dílů, než které určil nebo poskytl výrobce tohoto přístroje, může mít za následek zvýšené rušivé elektromagnetické záření nebo sníženou elektromagnetickou odolnost přístroje a způsobit chybný způsob provozu.
- Radiofrekvenční přístroje (včetně periferií jako anténních kabelů nebo externích antén) používejte minimálně ve vzdálenosti 30 cm od všech součástí tohoto přístroje, včetně všech kabelů dodávaných společně s přístrojem.
- Nerespektování těchto pokynů může způsobit omezení výkonu přístroje.

11.2 Ochranné brýle

Model	EP 02
Stupeň ochrany	16321 BEU RL 2,5 podle normy EN ISO 16321-1:2022
Označení ochranných brýlí	16321 BEU RL 2,5 Označení zorníků tvoří: - 16321 je normativní základ (1. část kódu) - Označení výrobce (2. část kódu) - Typ filtrační účinnosti (3. část kódu) - Charakteristická hodnota filtrační účinnosti (4. část kódu)

Notifikovaný orgán:

ECS European Certification Service GmbH

Obere Bahnstraße 14

73431 Aalen

Identifikační číslo: 1883

ES prohlášení o shodě <https://www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cedeclarationofconformity.php>

12. ZÁRUKA

Více informací o záruce a záručních podmínkách naleznete v příloženém záručním listu.

Omezení záruky Dodávaná infračervená lampa, stejně jako všechny osvětlovací prostředky, nepodléhá záruce.



Pozorne si prečítajte tento návod na použitie. Dodržiavajte výstražné a bezpečnostné pokyny. Tento návod na použitie si ponechajte na neskoršie použitie. Návod na použitie sprístupnite iným používateľom. Pri postúpení prístroja odovzdajte aj návod na použitie.

OBSAH

1. Obsah balenia	9	7. Čistenie a starostlivosť	12
2. Vysvetlenie symbolov	9	7.1 Čistenie	12
3. Účel použitia	9	7.2 Výmena infračervenej lampy	12
4. Výstražné a bezpečnostné upozornenia	10	7.3 Uskladnenie	13
5. Uvedenie do prevádzky	11	8. Náhradné a opotrebovateľné diely	13
5.1 Pred uvedením do prevádzky	11	9. Čo robiť, ak sa vyskytnú problémy?	13
5.2 Rozbalenie a postavenie	12	10. Likvidácia	13
5.3 Priprava terapie	12	11. Technické údaje	13
5.4 Trvanie terapie	12	11.1 Infračervená lampa	13
6. Použitie	12	11.2 Ochranné okuliare	14
6.1 Začiatok používania	12	12. Záruka	14
6.2 Po ošetrení	12		

1. OBSAH BALENIA

Skontrolujte obsah balenia a overte, či kartónový obal nevykazuje vonkajšie poškodenia a či je obsah kompletný. Pred použitím sa musíte uistiť, že prístroj a dodané komponenty nevykazujú žiadne viditeľné poškodenia a že je odstránený všetok obalový materiál. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu.

- 1 infračervená žiarovka
- 1 ochranné okuliare
- 1 tento návod na použitie

2. VYSVETLENIE SYMBOLOV

Na zariadení, v návode na obsluhu, na obale a na typovom štítku zariadenia sa používajú nasledovné symboly:

VAROVANIE

Označuje možné hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabrání, následkom môžu byť smrť alebo najťažšie zranenia.

UPOZORNENIE

Označuje potenciálne škodlivú situáciu. Ak sa jej nezabrání, môže sa zariadenie alebo niečo v jeho okolí poškodiť.



Pozor

Oznamuje, že je potrebná opatnosť, keď sa obsluhujú prístroje alebo regulátory nachádzajúce sa v blízkosti tohto symbolu alebo že si aktuálna situácia vyžaduje pozornosť alebo zásah obsluhy, aby sa predišlo neželaným následkom



Dodržiavajte návod

Pred začiatkom práce a/alebo obsluhou prístrojov alebo strojov si prečítajte návod



Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)



Výrobca



Značka CE

Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných noriem.



Označenie na identifikáciu obalového materiálu. A = skratka materiálu, B = číslo materiálu: 1-7 = plasty, 20-22 = papier a kartón



Oddelte výrobok a obalové komponenty a zlikvidujte ich v súlade s komunálnymi predpismi.



Trieda ochrany II

Zariadenie je vybavené dvojitou ochrannou izoláciou a preto zodpovedá triede ochrany 2



Chráňte pred vlhkom



Sériové číslo



Prípustná skladovacia teplota a vlhkosť vzduchu



Prípustná prevádzková teplota a vlhkosť vzduchu



Obmedzenie tlaku vzduchu



Nepozerajte do zdroja svetla



Je potrebné nosiť nepriehľadnú ochranu očí



Pozor, infračervené žiarenie



Pozor, horúci povrch



Spinomocnenec pre Švajčiarsko

3. ÚČEL POUŽITIA

Určené použitie

Táto infračervená lampa je určená iba na ožarovanie ľudského tela. Pri ožarovaní sa prostredníctvom infračerveného svetla prenáša na človeka teplo.

Cieľová skupina

Tento prístroj je určený na osobné použitie v domácom prostredí, nie v profesionálnych zdravotníckych zariadeniach. Použitie je vhodné pre všetky dospelé osoby, ktoré nie sú zmyslovo obmedzené a sú pri plnom vedomí.

Klinické využitie

Infračervenou lampou môže používateľ zahriať určité miesta kože pomocou infračerveného svetla. Tým sa zlepší prekrvenie ožarovanej pokožky a v zahrievanej oblasti sa zrýchli látková výmena. Účinky infračerveného svetla na telo stimulujú hojenie. Procesy hojenia sa cielenie podporujú.

Indikácie

Používateľ môže prístroj použiť na sprievodnú terapiu pri liečbe nasledujúcich stavov:

- ochorenia krku, nosa a uší, napr. akútna rinitída,
- akné,
- svalové napätia, napr.
 - periartriapatické ochorenia mäkkých tkanív (myalgia, myogéza, myotendopatia, fibrositída),
 - artralgia pri artróze,
 - reumatické ťažkosti kĺbov (nie pri zápaloch).

Kontraindikácie

VAROVANIE

- Tento prístroj nie je určený na použitie osobami s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo s nedostatočnými vedomosťami, okrem prípadov, keď sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo od nej dostali pokyny, ako sa má prístroj správne používať, aby sa zabránilo riziku požiaru alebo popálenín.
- Prístroj NEPOUŽÍVAJTE u osôb necitlivých na teplo.
- Pociťovanie tepla môže byť v nasledujúcich prípadoch obmedzené alebo zvýšené:
 - u diabetických pacientov,
 - u osôb s priechyným ochrnutím,
 - u ospalých osôb a osôb trpiacich demenciou alebo poruchami koncentrácie,
 - u osôb s chorobnými zmenami na koži,
 - u osôb s jazvami na koži v oblasti použitia,
- Tento prístroj NEPOUŽÍVAJTE v nasledujúcich prípadoch:
 - akútna reumatoidná artritída,
 - infekčná artritída,
 - pri poruchách prekrvenia,
 - dekompenzovaná srdcová insuficiencia alebo vážna srdcová arytmia,
 - akútny alebo nedávny infarkt myokardu,
 - nekontrolovaný diabetes mellitus, hypertyreóza, nedostatočnosť kôry nadobličiek,
 - infekcie,
 - otvorené rany,
 - silné opuchy,
 - pri liečbe ožarováním (vrát. troch mesiacov po liečbe),
 - poruchy citlivosti v ošetrovanej oblasti,
 - u detí a starších osôb,
 - po užití liekov alebo alkoholu.
- Prístroj nepoužívajte, ak nosíte implantát, zvlášť ak sa tento nachádza v ošetrovanej časti tela. V prípade pochybností konzultujte s lekárom.
- Ak ste tehotná, prístroj nepoužívajte v blízkosti podbruška, aby ste predišli prehriatiu v tejto oblasti. V prípade pochybností konzultujte s lekárom.
- Tento prístroj nie je určený na používanie deťmi. Deti by mali byť pod dozorom na zabezpečenie toho, aby sa s prístrojom nehrali, aby sa zabránilo nebezpečenstvu požiaru a popálenia.

Nežiaduce vedľajšie účinky

- Lieky, kozmetika alebo potraviny môžu za určitých okolností spôsobiť precitlivenosť alebo alergickú reakciu kože. V tomto prípade sa ožarovanie musí okamžite ukončiť.
- Počas terapie sa musí dodržiavať vhodná vzdialenosť medzi infračervenou lampou a požadovanou oblasťou ošetrovania, aby nedošlo k podráždeniu kože, ako je mravčenie, svrbenie, pálenie alebo príliš vysoká citlivosť na teplo. V takom prípade terapiu prerušte. Prípadne zvýšte vzdialenosť a/alebo znížte trvanie žiarenia.
- Dlhšie používanie môže spôsobiť popáleniny kože.

Používanie ochranných okuliarov v súlade s určením

Ochranné okuliare sú určené výlučne na ochranu očí pred infračerveným žiarením počas používania infračervenej lampy. Ochranné okuliare chránia len pred infračerveným žiarením. Ochranné okuliare NECHRANIA pred iným žiarením. Ochranné okuliare používajte len s infračervenými lampami beurer. Ochranné okuliare nepoužívajte s infračervenými lampami iných výrobcov. Ochranné okuliare nosíte vždy priamo na očiach a nie na iných okuliarech. Ochranné okuliare sú určené iba na použitie v domácom/súkromnom prostredí, nie na komerčné použitie. Ochranné okuliare nie sú vhodné na používanie ako ochrana očí proti mechanickým nebezpečenstvám (napr. pred nárazmi). Sú bez škodlivín podľa zákonných predpisov.

4. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Elektrická bezpečnosť

VAROVANIE

- Akékoľvek nesprávne použitie môže byť nebezpečné!
- Pred pripojením prístroja k napájaniu skontrolujte, či napätie uvedené na prístroji zodpovedá miestnemu sieťovému napätiu, aby ste predišli nebezpečenstvu zásahu elektrickým prúdom alebo trvalému poškodeniu prístroja
- V prípade potreby použite ľahko dostupnú sieťovú prípojku, aby ste v prípade potreby mohli rýchlo vytiahnuť zástrčku.
- Zástrčky sa nedotýkajte mokrymi rukami, nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
- Sieťový kábel uložte tak, aby oň nemohol nikto zakopnúť.
- V prípade, že prístroj nepoužívate, čistení alebo v prípade porúch, dymu a zápachu, vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky ťahajte za zástrčku – nie za kábel!
- Buďte opatrní pri manipulácii so sieťovým káblom (riziko úškrtienia a udusenía).
- Pred použitím sa uistite, že zariadenie a súčasti nevykazujú žiadne viditeľné poškodenia. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu. To platí najmä pre poškriabanie alebo praskliny na skle alebo na telese.
- Pri poškodení sieťového kábla a telesa sa obráťte zákaznícky servis alebo predajcu, pretože v prípade nedodržania hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Odpojenie od napájacej siete je zabezpečené iba vtedy, ak je vytiahnutá sieťová zástrčka zo zásuvky.
- V prípade, že sa poškodí sieťový kábel tohto prístroja, musí sa tento kábel zlikvidovať. V prípade, že ho nie je možné odobrať, musí sa zlikvidovať prístroj.
- Sieťový kábel nikdy neovíjajte okolo infračervenej lampy.

Bezpečnostné upozornenia pre vaše zdravie

VAROVANIE

- Nebezpečenstvo popálenia! Osvetľovací prostriedok a teleso prístroja sa počas prevádzky veľmi zahrievajú. Pri dotyku hrozí nebezpečenstvo popálenia!
- Prístroj nechajte vždy vychladnúť predtým, ako sa ho dotknete.
- Skôr než prístroj znovu zabalíte, vždy vytiahnite sieťovú zástrčku a nechajte ho vychladnúť.
- Prístroja sa nesmiete dotýkať vlhkými rukami, ak je zapojený do siete.
- Aby ste predišli riziku zásahu elektrickým prúdom, nepoužívajte prístroj vo vlhkom prostredí (napr. v kúpeľni alebo v blízkosti sprchy alebo bazény).
- **Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!**
 - Do prístroja nenechajte tiecť vodu.
 - Na prístroj nesmie striekať voda.
 - Prístroj sa smie používať iba úplne suchý.

Bezpečná manipulácia

VAROVANIE

- Tento prístroj nie je určený na komerčné použitie, ale výlučne na použitie v súkromnej domácnosti!
- Infračervené žiarenie vytvárané týmto prístrojom môže spôsobiť podráždenie očí. Nepozerajte sa do svetelného zdroja a používajte priložené ochranné okuliare.
- Obal uchovávajte mimo dosahu detí (nebezpečenstvo udusenía).
- Počas použitia vždy používajte priložené ochranné okuliare.
- Infračervenú lampu používajte vždy s nasadenou ochrannou mriežkou.
- Počas používania nikdy neodstraňujte ochrannú mriežku. Ochrannú mriežku odstráňte iba pri výmene infračervenej lampy.
- Nepoužívajte na bábätkách a malých deťoch.
- Tento prístroj nie je určený na používanie na prebaľovacích skrínkach, detských postieľkach alebo podobne.
- Prístroj nikdy nepoužívajte v blízkosti vody.
- Ak prístroj spadol alebo bol vystavený extrémnej vlhkosti alebo ak sa iným spôsobom poškodil, nesmie sa ďalej používať.
- Prístroj sa nesmie ponárať do vody alebo tekutín a do prístroja sa nesmie dostať žiadna tekutina.
- Aby ste predišli nebezpečenstvu požiaru a popálenín, nenechávajte prístroj počas prevádzky bez dozoru.
- Okamžite vypnite prístroj, ak je pokazený alebo ak sa vyskytujú poruchy.
- Po použití a v prípade výpadku elektrického prúdu vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky, aby ste predišli poškodeniu prístroja.
- Ak je zásuvka, na ktorej je prístroj pripojený, nesprávne pripojená, zástrčka prístroja sa zohreje. Uistite sa, že prístroj je pripojený k správne nainštalovanej zásuvke, aby ste predišli riziku požiaru a popálenia.

Dôležité upozornenia

VAROVANIE

- Vzdialenosť od infračervenej lampy sa zásadne riadi podľa individuálnej citlivosti na teplo a príslušnej terapie. Čím väčšia je vzdialenosť medzi vami a prístrojom, tým väčšia je ošetrovaná oblasť a nižšie je teplo infračerveného svetla. Pri menšom odstupe sa znižuje aj ošetrovaná oblasť a zvyšuje sa intenzita tepla infračerveného svetla.
- Obmedzte dobu použitia a kontrolujte reakciu pokožky.
- Infračervenú lampu prevádzkujte len v takej vzdialenosti od požadovanej oblasti žiarenia, aby ste počas terapie nezaznamenali žiadne podráždenie kože ako mravčenie, svrbenie, pálenie alebo príliš vysokú citlivosť na teplo. V takom prípade terapiu prerušte. Prípadne zväčšite vzdialenosť a/alebo skráťte dĺžku terapie.

- Tento prístroj nie je určený na ožarovanie zhora.
- Tento produkt nie je určený na osvetlenie priestoru v domácnosti.
- Aby ste sa vyhlí neúmyselnému kontaktu s horúcim osvetľovacím prostriedkom, dajte na to, aby bola vzdialenosť medzi vami a prístrojom dostatočne veľká. Vzdialenosť od prístroja zvoľte tak, aby bolo teplo pre vás príjemné.
- Lieky, kozmetika a potraviny môžu za určitých okolností spôsobiť precitlivenosť alebo alergickú reakciu kože. Ožarovanie sa v takom prípade musí okamžite ukončiť.
- Pri trvalej prevádzke prístroja je potrebná osobitná opatrnosť a pozornosť.
- Prístroj nepoužívajte, ak ste unavený a existuje nebezpečenstvo, že by ste počas ožarovania zaspali!
- Príliš dlhé ožarovanie môže spôsobiť popáleniny kože.
- Deti nevedia rozpoznáť nebezpečenstvo vyplývajúce z elektrických prístrojov. Zabezpečte, aby deti nemohli používať prístroj bez dozoru.
- Prístroj nepoužívajte v prostrediach s výskytom vlákien alebo prachu.

Výstražné a bezpečnostné upozornenia pre ochranné okuliare

VAROVANIE

- Obal uchovávajte mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo udusenía.
- Deti sa nesmú hrať s ochrannými okuliarmi.
- Pred použitím skontrolujte, či ochranné okuliare nevykazujú vonkajšie poškodenia (napr. praskliny alebo diery). Ak sú ochranné okuliare poškodené, NESMIETE ich ďalej používať.
- Nepoužívajte ochranné okuliare, ktoré boli vystavené nárazom; musia sa zlikvidovať a vymeniť.
- Materiály ochranných okuliarov, ktoré prichádzajú do kontaktu s pokožkou používateľa, môžu u osôb s citlivou pokožkou vyvolať alergické reakcie.
- Dbajte o to, aby ochranné okuliare neprišli do kontaktu s tukmi, olejmi alebo alkoholom (napr. s čistiacimi prostriedkami alebo pleťovou vodou).
- Ochranné okuliare používajte len v pokojných prostrediach, aby ste počas použitia neboli rozptyľovaní.
- Ochranné okuliare nie sú vhodné na jazdu a cestnú premávku

Oprava

VAROVANIE

- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Prístroj smiete otvárať len pri výmene infračervenej lampy. Pred výmenou infračervenej lampy vytiahnite sieťový kábel zo zásuvky! Prístroj nikdy neopravujte, pretože inak už nebude zaručená jeho bezchybná funkcia. Pri neoddraní zaniká záruka.
- Prístroj nikdy neprevádzkujte počas údržby.
- Pri opravách sa obráťte na zákaznicky servis alebo na autorizovaného predajcu.

5. UVEDENIE DO PREVÁDZKY

5.1 Pred uvedením do prevádzky

UPOZORNENIE

- Pred použitím prístroja odstráňte všetky obalové materiály.
- Prístroj skontrolujte, či nevykazuje známky opotrebovania alebo poškodenia. Ak je prístroj poškodený, nepoužívajte ho a v prípade pochybností sa obráťte na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákaznického servisu.
- Výrobca neručí za škody, ktoré vzniknú v dôsledku neprimeraného alebo nesprávneho použitia.

- Pred použitím skontrolujte, či je osvetľovací prostriedok bezpečne nasadený.
- Prístroj chráňte pred prachom, nečistotami, slnečným žiarením a vlhkosťou.

5.2 Rozbalenie a postavenie

▲ VAROVANIE

- Prístroj sa nikdy nesmie postaviť nanežato alebo šikmo.
- Vždy dbajte na bezpečné a rovné umiestnenie prístroja.
- Minimálna vzdialenosť medzi horľavými predmetmi a infračervenou lampou nesmie byť menšia ako 1 meter.
- Dbajte o to, aby prístroj nestál na horľavých predmetoch, napr. stolových doskách alebo kobercoch.
- Do blízkosti prístroja nedávajte žiadne ľahko zápalné alebo rozpušťajúce sa predmety.
- Prístroj nevesajte na stenu alebo na strop.
- Prístroj nepoužívajte vo voľnom priestranstve.
- Prístroj chráňte pred silnejšími nárazmi, aby ste predišli riziku poškodenia lampy. Sem patrí aj neopatrné postavenie.
- Sieťový kábel úplne odviňte.

UPOZORNENIE

Počas prevádzky a fázy ochladnutia zabráňte nárazom, pretože tieto by mohli poškodiť infračervený žiarič.

1. Postavte prístroj na stabilnú, rovnú podložku.
2. Zasuňte sieťovú zástrčku do zásuvky.

5.3 Príprava terapie

1. Postavte sa pred prístroj tak, aby ste si mohli uvoľnene vychutnávať terapiu príslušnej časti tela.
2. Naklonením infračervenej lampy nastavte optimálnu orientáciu prístroja k ošetrovanej časti tela. Vzdialenosť od infračervenej lampy sa zásadne riadi podľa individuálnej citlivosti na teplo a príslušnej terapie.
3. Vzdialenosť od prístroja zvolte tak, aby bolo teplo vždy príjemné na pokožke. Ak teplo na pokožke pociťujete ako príliš horúce, zväčšite vzdialenosť od prístroja.
4. Počas použitia vždy používajte priložené ochranné okuliare. Ochranné okuliare zodpovedajú požiadavkám EN ISO 16321-1:2022 a slúžia na ochranu očí.

▲ VAROVANIE

Do infračerveného svetla sa nikdy nepozerajte bez ochranných okuliarov. Prístroj nepoužívajte nepretržite dlhšie ako 15 minút, nebezpečenstvo prehriatia! Pred opätovným použitím nechajte prístroj najskôr vychladnúť.

5.4 Trvanie terapie

▲ VAROVANIE

Nebezpečenstvo popálenín: Pred zapnutím prístroja odstráňte z ošetrovanej oblasti odstráňte kovové prvky, ako napr. opaskové spony, retiazky, podprsenky, šperky alebo piercing, pretože tieto sa môžu silne zahriať.

Zo začiatku odporúčame zvoliť kratšiu dobu ožarovania. Pokožka jednotlivých ľudí však môže aj pri správnom použití prístroja reagovať nadmerne citlivo (napr. silné začervenanie, tvorba pluzgierov, svrbenie, silné potenie) alebo alergicky.

Ak sa p 6 až 8 aplikáciách ťažkosti nezmieria, prístroj prestaňte používať a poraďte sa so svojím lekárom.

6. POUŽITIE

6.1 Začiatok používania

▲ VAROVANIE

Počas terapie vždy používajte priložené ochranné okuliare. Pravidelne kontrolujte ožarované miesto na tele a reakciu pokožky. Pri známkach precitlivosti alebo alergickej reakcie okamžite ukončíte ožarovanie a poraďte sa s lekárom. Nikdy sa nepozerajte priamo do zapnutej infračervenej lampy.



Nebezpečenstvo popálenia! Počas terapie sa nikdy nedotýkajte horúceho osvetľovacieho prostriedku **X**.

1. Ochranné okuliare držte na očiach a gumovú pásku si natiahnite cez hlavu. Gumový pás môžete individuálne nastaviť.
2. Zasuňte sieťovú zástrčku do vhodnej zásuvky. Infračervená lampa začne svietiť.
3. Teraz môžete začať s terapiou.
4. Na ukončenie terapie, vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
5. Zložte si ochranné okuliare. Nechajte prístroj vychladnúť.

6.2 Po ošetrení

▲ VAROVANIE

- Infračervená lampa je po použití horúca. Infračervenú lampu najskôr dostatočne dlho vychladnúť, skôr ako sa jej dotknete!
- Dbajte na to, že sieťový kábel nesmiete omotávať okolo infračervenej lampy, keď ju chcete uskladniť alebo počas prevádzky!
- Po použití vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky, aby ste prístroj úplne vypli.
- Zohriaty prístroj sa nesmie prikrývať ani zakrývať alebo uschovávať v obale!

7. ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

7.1 Čistenie

▲ VAROVANIE

Pred každým čistením sa prístroj musí vypnúť, odpojiť od elektrickej siete a nechať úplne vychladnúť.

UPOZORNENIE

- Dbajte na to, aby sa dovnútra prístroja nedostala žiadna voda!
- Prístroj neumývajte v umývačke riadu!

Prístroj sa môže čistiť vlhkou handrou. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá. Prístroj by sa mal čistiť po každom použití.

Občas ochranné okuliare vyčistite. Na čistenie použite mierne navlhčenú a mäkkú handričku. Nepoužívajte ostré alebo drsné čistiace prostriedky.

7.2 Výmena infračervenej lampy

Nezabudnite, že ako náhrada za chybnú infračervenú lampu sa môže použiť iba infračervená lampa rovnakého typu.

▲ VAROVANIE

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom **A**!

- Pred výmenou infračervenej lampy vytiahnite sieťový kábel zo zásuvky!
- Nebezpečenstvo popálenia na horúcich povrchoch!
- Pred začatím opravy nechajte prístroj úplne vychladnúť!
- Záruka sa nevzťahuje na osvetľovacie prostriedky.

Pri výmene infračervenej lampy postupujte nasledovne:

1. Najprv odstráňte ochrannú mriežku odkrutkovaním bočnej skrutky skrutkovačom a opatrne stiahnite ochrannú mriežku z prístroja.
2. Vyskrutkujte starú infračervenú lampu z prístroja.
3. Do prístroja zaskrutkujte novú infračervenú lampu.
4. V prípade potreby vyčistite prednú stranu infračervenej lampy pomocou vlhkej handry s trochu umývacieho prostriedku.
5. Opäť nasadte ochrannú mriežku na prístroj.
6. Dotiahnite bočnú skrutku na ochrannej mriežke skrutkovačom.
7. Skontrolujte, či je ochranná mriežka pevne osadená na prístroj.

7.3 Uskladnenie

1. Skôr než prístroj premiestnite, vždy vytiahnite sieťovú zástrčku a nechajte ho vychladnúť.
2. Ak ochranné okuliare nebudete dlhší čas používať, odporúčame ich uschovávať v originálnom balení v suchom prostredí a bez zaťaženia.
3. Prístroj je najlepšie uschovávať v originálnom obale na suchom mieste.

8. NÁHRADNÉ A OPOTREBOVATEĽNÉ DIELY

Príslušenstvo a náhradné diely nájdete na stránke www.beurer.com alebo sa obráťte na príslušnú adresu servisu vo svojej krajine (podľa zoznamu servisných adries).

Náhradný žiarič/typ:	Technické údaje:	Číslo výrobku:
Infrared R95 (100 W)	230V ~ 50 Hz	614.51
Náhradný diel:	Číslo výrobku:	
Ochranné okuliare	200.593	

9. ČO ROBIŤ, AK SA VYSKYTNÚ PROBLÉMY?

Problém	Možná príčina	Odstránenie
Infračervená lampička nesvieti	Žiaden prúd	Zasuňte sieťovú zástrčku správne do zásuvky
	Prekročená doba svietenia infračervenej lampy	Infračervená lampička je chybná. Kontaktujte zákaznícky servis alebo svojho predajcu
	Po výmene infračervenej lampy nebola správne vložená nová infračervená lampička	Skontrolujte, či bola nová infračervená lampička správne vložená podľa popisu v kapitole 7.2

10. LIKVIDÁCIA


V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po skončení svojej životnosti nesmie likvidovať s komunálnym odpadom. Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom príslušných zberných miest vo vašej krajine. Pri likvidácii materiálov dodržiavajte miestne predpisy. Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). V prípade otázok sa obráťte na miestny úrad zodpovedný za likvidáciu. O zberných miestach pre staré zariadenia sa informujte, napr. na svojom miestnom obecnom, resp. mestskom úrade, v miestnych podnikoch na spracovanie odpadov alebo u svojho predajcu.



11. TECHNICKÉ ÚDAJE

11.1 Infračervená lampička

Elektrické pripojenie	AC 220 - 230 V/50 - 60 Hz
Prikon	100 W
Riziková skupina	RG2, stredná riziková skupina
Max. intenzita ožarovania podľa EN 62471	<3200 W/m ²
Rozmery (Š x V x H)	180 x 122 x 205 mm
Hmotnosť	cca 331 g
Prevádzkové podmienky	Teplota: 5 °C až 35 °C Relatívna vlhkosť vzduchu: 15 % – 93 %, okolitý tlak: 700 hPa – 1060 hPa
Prepravné a skladovacie podmienky	Teplota: -25 °C až +70 °C Relatívna vlhkosť vzduchu: ≤ 93 %
Vyslaný rozsah vlnovej dĺžky infračerveného žiarenia	IRA + IRB/780 – 3000 nm
Trieda ochrany	II
Očakávaná doba svietenia osvetľovacieho prostriedku	300 hodín
Bezpečná vzdialenosť od oka	14,6 cm
Trieda ochrany IP	IP20
Očakávaná životnosť prístroja	Informácie o životnosti výrobku nájdete na domovskej stránke

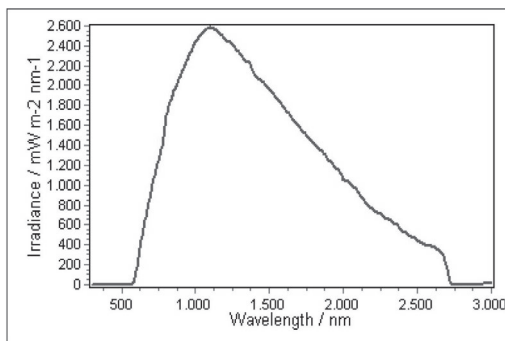

Pri použití prístroja mimo jeho špecifikácie nie je zaručená jeho bezchybná funkcia! Vyhradzujeme si právo na technické zmeny s cieľom zlepšovania a ďalšieho vývoja výrobku. Tento prístroj zodpovedá európskej norme EN 60601-1-2 (Skupina 1, trieda B, zhoda s CISPR 11, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-39) a podlieha osobitným opatreniam s ohľadom na elektromagnetickú kompatibilitu. Myslite pritom na to, že prenosné a mobilné vysokofrekvenčné komunikačné zariadenia môžu vplyvať na tento prístroj. Presnejšie informácie si môžete vyžiadať na uvedenej adrese zákazníckeho servisu alebo ich nájdete na konci návodu na použitie. Tento prístroj vyhovuje smernici EÚ o zdravotníckych pomôckach 93/42/EEC a jej doplnkami a zákonu o zdravotníckych pomôckach. Sériové číslo sa nachádza na zariadení alebo v priehradke na batérie.

Oznámenia týkajúce sa elektromagnetickej compatibility

- Prístroj je navrhnutý tak, aby mohol byť prevádzkovaný vo všetkých prostrediach uvedených v tomto návode na obsluhu, vrátane domáceho prostredia.
- V prítomnosti elektromagnetického rušenia môže byť prístroj za určitých okolností používaný iba v obmedzenej miere. V dôsledku toho sa môžu vyskytnúť napr. chybové hlásenia alebo porucha displeja/prístroja.
- Treba sa vyhnúť tomu, aby sa tento prístroj používal bezprostredne vedľa iných prístrojov alebo s ďalšími prístrojmi na sebe, pretože to môže mať za následok chybný spôsob prevádzky. Ak je napriek tomu potrebné používať ho popísaným spôsobom, tento prístroj a ďalšie prístroje je nutné sledovať, aby ste sa presvedčili, že fungujú správne.
- Použitím iných náhradných dielov ako tých, ktoré stanovil alebo zabezpečil výrobca tohto prístroja, môže mať za následok zvýšené rušivé elektromagnetické vyžarovanie alebo zníženie elektromagnetickú odolnosť zariadenia a môže viesť k chybnému spôsobu prevádzky.
- Prenosné RF komunikačné zariadenia (vrátane periférnych zariadení, ako sú anténne káble alebo externé antény) musia byť vzdialené aspoň 30 cm od všetkých častí prístroja, vrátane káblov, ktoré sú súčasťou balenia.
- Nedodržanie tohto pokynu môže mať za následok zníženie výkonu prístroja.

11.2 Ochranné okuliare

Model	EP 02
Stupeň ochrany	16321 BEU RL 2,5 podľa EN ISO 16321-1:2022
Označenie ochranných okuliarov	16321 BEU RL 2,5 Označenie ochranných skiel sa skladá z: - 16321 je normatívny základ (1. časť kódexu) - Označenie výrobcu (2. časť kódu) - Typ účinnosti filtra (3. časť kódu) - Charakteristika výkonu filtra (4. časť kódu)

Notifikovaný orgán:

ECS European Certification Service GmbH
Obere Bahnstraße 14
73431 Aalen

Identifikačné číslo: 1883

Vyhlásenie o zhode EÚ:

<https://www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cedclarationofconformity.php>

12. ZÁRUKA

Bližšie informácie o záruke a záručných podmienkach nájdete v priloženom záručnom liste.

Obmedzená záruka: Na infračervenú lampu, tak ako na všetky osvetľovacie prostriedky, ktorá je súčasťou balenia, sa záruka nevzťahuje.

