



Minipistolet do masażu

PL Instrukcja obsługi

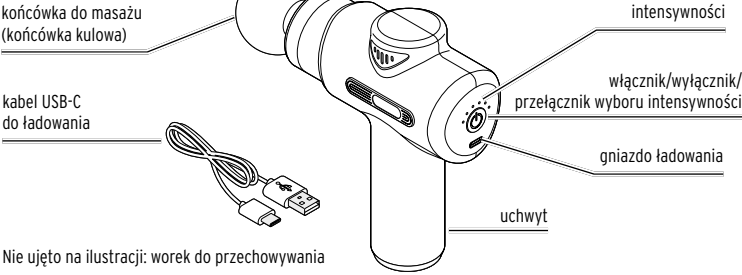

Nale ujęto na ilustracji: worek do przechowywania

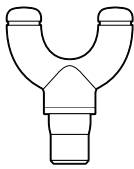


Kończówka widelkowa

Do masowania średnich grup mięśni, np. w okolicy kręgosłupa szyjnego czy na łydkach.



Kończówka płaska

Do masowania mniejszych grup mięśni, np. obszaru obręczy barkowej i karku.

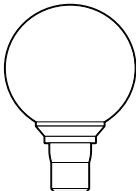

Kończówka kulowa

Do masowania dużych grup mięśni, np. w obrębie ud lub pośladków.



Kończówka stożkowa

Przeznaczona do masażu punktowego, np. punktów spustowych lub małych obszarów mięśni, np. na stopach oraz w okolicy nadgarstków.

Wskazówki bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

- Minipistolet do masażu jest przeznaczony do automasażu poprawiającego samopoczucie.
- Minipistolet do masażu został zaprojektowany do użytku prywatnego. Nie nadaje się on do stosowania w klinikach, gabinetach masażu, salonach wellness itp. Minipistolet do masażu nie jest wyrobem medycznym i nie służy do leczenia bólu.
- W razie wątpliwości lub niepewności należy przed użyciem produktu skonsultować się z lekarzem.
- Produkt można stosować wyłącznie ...
 - ... do zastosowań zewnętrznych na ciele.
 - ... zgodnie z przeznaczeniem, w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Każde użycie niezgodne z przeznaczeniem może być niebezpieczne!

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci

- To urządzenie może być użytkowane przez dzieci od 14. roku życia i starsze, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach sensorycznych lub umysłowych oraz nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy, o ile osoby te znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz zrozumiały ewentualne zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci bez nadzoru ze strony osoby dorosłej nie mogą przeprowadzać prac związanych z czyszczeniem ani konserwacją urządzenia.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Produkt nie jest zabawką. Dzieci nie mogą mieć do niego dostępu.

Aby nie narażać zdrowia, zdecydowanie odradza się stosowanie urządzenia w następujących przypadkach:

- Nie należy używać produktu ...
 - ... w przypadku zmian chorobowych w kręgosłupie.
 - ... w okresie ciąży.
 - ... w przypadku wystąpienia zmian chorobowych lub urazów w obszarach masażu (np. stłuczenia, stany zapalne, otwarte rany, wypadnięcie dysku itp.).
 - ... po zażyciu substancji, które powodują obniżenie zdolności postrzegania (np. środków przeciwbólowych, alkoholu).
 - ... do masowania oczu, okolic oczu, krtani, kości lub stawów, bezpośrednio na kręgosłupie, miejsc intymnych, nerek lub innych szczególnie wrażliwych części ciała.

- ... podczas leżenia w łóżku.
- ... przez pół godziny przed posiłkiem lub po posiłku.
- ... na zwierzętach.
- ... w przypadku widocznych uszkodzeń urządzenia.

Przed zastosowaniem urządzenia zasięgnąć porady lekarza, zwłaszcza w przypadku ...

- ... gdy użytkownik cierpi na ciężką chorobę lub ma za sobą operację chirurgiczną.
- ... posiadania rozrusznika serca, implantów lub innych aparatów wspomagających.
- ... jeśli użytkownik ma nieprawidłowe ciśnienie tętnicze lub wysoką gorączkę.
- ... zakrzepowego zapalenia żył.
- ... cukrzycy.
- ... w przypadku występowania bólu niewiadomego pochodzenia.
- Czas trwania masażu nie powinien być dłuższy niż 15 minut. Dłuższy masaż może prowadzić do nadmiernej stymulacji mięśni. W niektórych przypadkach może wówczas dojść do napięcia mięśni zamiast do ich rozluźnienia.
- Jeżeli podczas używania urządzenia pojawiają się bóle lub wysypka skórna, należy natychmiast zakończyć masaż i nie używać więcej produktu.

Należy przestrzegać następujących zasad bezpiecznego użytkowania:

- Nie wolno wkładać do produktu żadnych ostrych ani spiczastych przedmiotów, np. agrałek itp.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. W przypadku nieprawidłowego działania lub uszkodzenia produktu należy zlecić jego naprawę zakładowi specjalistycznemu.
- Nigdy nie wolno pozostawiać włączonego produktu bez nadzoru.

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

- Produkt może być ładowany wyłącznie w suchych pomieszczeniach. Do ładowania należy używać odpowiedniego zasilacza sieciowego USB (patrz „Dane techniczne”, nie wchodzi w zakres dostawy) oraz wyłącznie dołączonego w komplecie kabla USB-C do ładowania.
- Nie należy używać ani ładować produktu w pobliżu wody. Urządzenie nie może mieć kontaktu z wodą ani innymi cieczami, gdy jest podłączone do sieci elektrycznej. Podczas ładowania produktu nie wolno zanurzać w wodzie lub innych cieczach, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- Również gdy produkt nie jest ładowany, należy go trzymać z dala od mokrych miejsc i wilgoci.
- Zasilacz sieciowy należy wyciągnąć z gniazdka elektrycznego, jeśli w trakcie ładowania wystąpią zakłócenia, gdy urządzenie jest w pełni naładowane, w czasie burzy lub przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia.

OSTRZEŻENIE przed pożarem/wybuchem


- Urządzenie zawiera wbudowany na stałe akumulator litowo-jonowy. Nie wolno wrzucać urządzenia do ognia. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!
- W trakcie procesu ładowania produkt nagrzewa się. Nie wolno przykrywać produktu.
- Nie ładować produktu w pobliżu gazów wybuchowych.
- Nie wolno narażać produktu na działanie otwartego ognia, wilgoci, wysokich temperatur, bezpośredniego światła słonecznego itp. Istnieje ryzyko przegrzania, wybuchu i powstania zwarcia.
- Nie wolno używać produktu w przypadku, gdy sam produkt lub dołączony w komplecie kabel do ładowania wykazują widoczne uszkodzenia.
- Poza wymianą końcówek do masażu nie wolno wprowadzać żadnych zmian w urządzeniu. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą prowadzić do powstania poważnych zagrożeń dla użytkownika.
- Akumulator jest wbudowany na stałe. Nie ma możliwości i nie wolno samodzielnie go wymieniać. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu wskutek niewłaściwej wymiany akumulatora!
W przypadku, gdy akumulator jest uszkodzony, należy skontaktować się z zakładem specjalistycznym.

UWAGA - ryzyko odniesienia lekkich obrażeń ciała i strat materialnych

- Nie wolno włączać urządzenia bez założonej końcówki do masażu.
- Podczas używania urządzenia należy trzymać od niego z daleka długie włosy, łańcuszki itp.
- Nie używać urządzenia pod kocem lub innym przykryciem. Może dojść do przegrzania.
- Produkt należy chronić przed kurzem/pyłem, wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami.
- Nie wolno siadać na produkcie! Nie wolno też kłaść na nim żadnych ciężkich przedmiotów. Spowoduje to uszkodzenie produktu.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.

Ładowanie

Aby chronić akumulator przed uszkodzeniem, w chwili dostawy jest on naładowany jedynie w połowie. Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator.

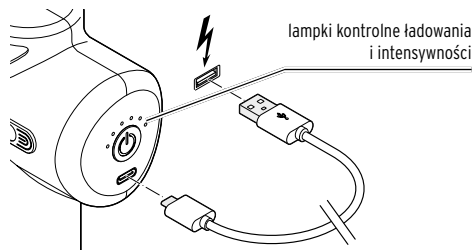

1. Włożyć wtyczkę dołączonego w komplecie kabla USB-C do ładowania do gniazda ładowania w urządzeniu.
2. Połączyć kabel USB-C do ładowania z odpowiednim zasilaczem sieciowym USB, a następnie włożyć ten zasilacz do gniazda elektrycznego.

Migająca lampka kontrolna sygnalizuje trwający proces ładowania akumulatora. Świecące lampki kontrolne sygnalizują poziom naładowania akumulatora:


3. Akumulator jest całkowicie naładowany, gdy wszystkie lampki kontrolne świecą się i żadna już nie miga. Wyciągnąć wtedy zasilacz sieciowy z gniazda elektrycznego oraz kabel USB-C do ładowania z gniazda ładowania.

Czas ładowania całkowicie rozładowanego akumulatora wynosi ok. 3-4 godzin.


Czas działania urządzenia przy całkowicie naładowanym akumulatorze i maksymalnej intensywności wynosi około 2 godzin i 15 minut.

i Aby jak najdłużej utrzymać pełną pojemność akumulatora, należy co 3 miesiące całkowicie naładować akumulator, nawet jeżeli produkt nie jest używany. Czas działania akumulatora jest najdłuższy w normalnej temperaturze pokojowej. Im niższa temperatura, tym krótszy czas działania akumulatora.

Obsługa

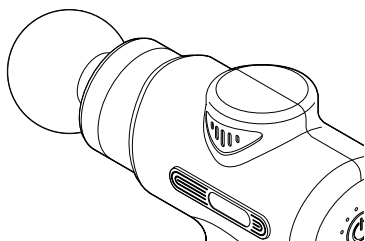

1. Włożyć żądaną końcówkę do masażu w przewidziane na nią gniazdo w urządzeniu.

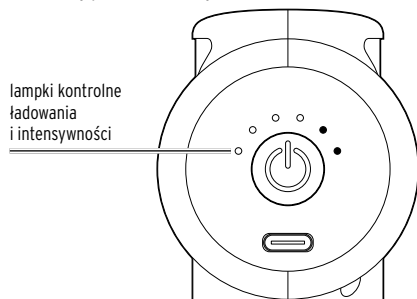

i Aby uzyskać informację o stanie naładowania akumulatora, należy nacisnąć krótko przycisk . 2. Przytrzymać wciśnięty przycisk , aby wyłączyć urządzenie.

Pierwsza lampka kontrolna świeci i włączony jest najniższy stopień intensywności masażu.

3. Nacisnąć krótko przycisk , aby stopniowo zwiększać intensywność masażu.

W zależności od ustawionej intensywności masażu świeci odpowiednia liczba lampek kontrolnych.

Gdy świeci wszystkich sześć lampek kontrolnych, osiągnięty jest najwyższy stopień intensywności masażu.

4. Przytrzymać wciśnięty przycisk , aby wyłączyć urządzenie.

Lampki kontrolne gasną.


5. Prowadzić końcówkę do masażu powoli i okrężnymi ruchami (w zależności od używanej końcówki) po masowanej części ciała.



• Podczas masażu nie należy zbyt mocno dociskać urządzenia do skóry.

• Nigdy nie wolno przetrzymywać urządzenia przez dłuższy czas w jednym miejscu.

• **Nie należy stosować urządzenia bezpośredniego na kręgosłupie.** Jeśli używana jest końcówka widełkowa, należy prowadzić ją po plecach w taki sposób, aby widełki końcówki znajdowały się obok kręgów.

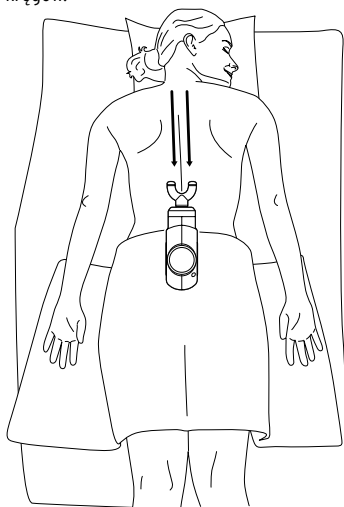

Czas trwania masażu nie powinien być dłuższy niż 15 minut. Dlatego urządzenie wyłącza się automatycznie po 15 minutach pracy.

- Po użyciu należy wyciągnąć końcówkę do masażu z gniazda urządzenia.

Pielęgnacja

- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy odłączyć go od sieci elektrycznej i wyłączyć.
- Przetrzeć urządzenie oraz końcówki do masażu lekko zwilżoną ściereczką.
- Przechowywać urządzenie w suchym miejscu, do którego dzieci nie mają dostępu.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Nie można włączyć urządzenia.

- Czy akumulator musi zostać naładowany?

Nie można naładować urządzenia.

- Sprawdzić połączenia wtykowe między urządzeniem, kablem USB-C do ładowania, zasilaczem sieciowym i gniazdkiem elektrycznym.
- Wyciągnąć na chwilę zasilacz sieciowy z gniazda elektrycznego i odłączyć kabel do ładowania USB-C, a następnie spróbować ponownie.

Usuwanie odpadów

Urządzenie, jego opakowanie oraz wbudowany akumulator zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne.

W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.

Uwaga! To urządzenie zawiera akumulator, który ze względów bezpieczeństwa jest wbudowany na stałe i nie może zostać wyjęty bez zniszczenia obudowy produktu. Nieprawidłowy demontaż akumulatora może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika. Dlatego należy przekazać zużyte urządzenie w stanie zamkniętym do punktu zbiórki, który zapewni fachową utylizację samego urządzenia oraz wbudowanego akumulatora.

Dane techniczne

Model:	719 590
Akumulator:	litowo-jonowy 7,4 V 1200 mAh (przebadano wg UN 38.3) (symbol oznacza prąd stały) energia znamionowa: 8,88 Wh $\pm$ 10%
Czas ładowania:	ok. 3,5 godziny
Maks. czas działania przy w pełni naładowanym akumulatorze:	ok. 2 h 15 min (przy maksymalnej intensywności) ok. 3 h 45 min (przy minimalnej intensywności)
Klasa ochronności:	III
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C
Producent:	Commaxx BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Holandia)

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.

Informacje dot. włożonego akumulatora

Producent:	Yongkang Shengyuan Technology Co., Ltd. 2F, No. 9, Geshantou, Shangtiaojiaoqiao Natural Village, Xicheng Street, Yongkang City, Jinhua City, Zhejiang Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
E-mail:	674751020@qq.com
Telefon:	0086 15989510939
Model:	Li-ion 18650 - 2S1P 1200 mAh
Data produkcji:	2025/06
Kraj produkcji:	Chiny

